



MA CP100B-XX_CP100R-XX_CP103R-XX_CP104-XX_CP105-XX_CP500B-XX_CP500R-XX_CP505-XX_02_A_EL_06-2022

ΑΜΑΞΙΔΙΑ ARDEA ONE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΚΩΔΙΚΟΙ	ΣΕΛ.3
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΣΕΛ.3
3. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΕΛ.3
4. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ	ΣΕΛ.3
5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΣΕΛ.4
6. ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ	ΣΕΛ.4
7. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΕΛ.5
7.1 Προβολή και λίστα εξαρτημάτων	σελ. 5
8. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ	ΣΕΛ.5
8.1 Άνοιγμα	σελ. 5
8.2 Κλείσιμο	σελ. 6
8.3 Εγκατάσταση/αφαίρεση υποβραχιόνων.....	σελ. 6
8.4 Εγκατάσταση/αφαίρεση πλευρικών υποποδίων ή υποποδίων που ανυψώνονται	σελ. 6
8.5 Ρύθμιση των πλευρικών υποπόδιων	σελ. 7
8.6 Ρύθμιση υποπόδιων που ανυψώνονται (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)	σελ. 7
8.7 Εγκατάσταση/αφαίρεση μικρών πίσω τροχών (μόνο για το GO!).....	σελ. 7
8.8 Ρύθμιση των φρένων με μικρούς πίσω τροχούς (μόνο για το GO!).....	σελ. 8
8.9 Εγκατάσταση/αφαίρεση των μεγάλων πίσω τροχών (μόνο για το START/START2 και START3)	σελ. 8
8.10 Ρύθμιση των φρένων με μεγάλους πίσω τροχούς (μόνο για το START/START2 και START3)	σελ. 8
9. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ	ΣΕΛ.9
10. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ	ΣΕΛ.9
11. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΕΛ.9
11.1 Τοποθέτηση στο αμαξίδιο	σελ. 9
11.2 Κατέβασμα από το αμαξίδιο	σελ. 9
11.3 Σκαλοπάτια και ανομοιομορφίες (συμβουλές για το πώς να τα αντιμετωπίσετε καλύτερα μόνοι σας).....	σελ. 9
11.4 Χρήση των υποβραχιόνων	σελ. 10
11.5 Χρήση των τροχών αυτοκίνησης	σελ. 10
11.6 Χρήση μικρών τροχών.....	σελ. 10
11.7 Χρήση μικρών τροχών για στενά περάσματα (της σειράς σε μοντέλα με ταχεία αποσύνδεση).....	σελ. 10
11.8 Μεταφορά με μέσα μετακίνησης.....	σελ. 10
12. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΣΕΛ.11
13. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ	ΣΕΛ.11
13.1 Καθαρισμός επενδύσεων και μαξιλαριών	σελ. 11
13.2 Καθαρισμός σκελετού και μεταλλικών μερών	σελ. 11
13.3 Καθαρισμός τροχών και φρένων	σελ. 11
13.4 Απολύμανση.....	σελ. 11
14. ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΣΕΛ.11
15. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΣΕΛ.11
16. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΕΛ.12
16.1 Διαστάσεις.....	σελ. 12
16.2 Τεχνικές προδιαγραφές.....	σελ. 13
17. ΕΓΓΥΗΣΗ	ΣΕΛ.13
17.1 Επισκευές	σελ. 13
17.2 Ανταλλακτικά	σελ. 14
17.3 Ρήτρες εξαίρεσης	σελ. 14

CE Ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας I
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

1. ΚΩΔΙΚΟΙ

- CP100B-xx** Σειρά **START** τροχοί 60 cm - **Πτυσσόμενο αυτοκινούμενο**
- CP100R-xx** Σειρά **START** τροχοί 60 cm - **Πτυσσόμενο αυτοκινούμενο**
- CP103R-xx** Σειρά **START2** τροχοί 60 cm - **Πτυσσόμενο αυτοκινούμενο**
- CP104-xx** Σειρά **START3** τροχοί 60 cm - **Πτυσσόμενο αυτοκινούμενο με διπλό σταυρό χιαστί και διπλή οπή**
- CP105-xx** Σειρά **START3 GO!** τροχοί 30 cm - **Πτυσσόμενο αυτοκινούμενο με διπλό σταυρό χιαστί και διπλή οπή**
- CP500B-xx** Σειρά **GO!** τροχοί 30 cm - **Πτυσσόμενο μεταφοράς**
- CP500R-xx** Σειρά **GO** τροχοί 30 cm - **Πτυσσόμενο μεταφοράς**
- CP505-xx** Σειρά **GO!2** τροχοί 30 cm - **Πτυσσόμενο αυτοκινούμενο με διπλό σταυρό χιαστί**
- (**R** = Κόκκινο, **B** = Μπλε, **xx** = Δείχνει τις μετρήσεις του διαθέσιμου καθίσματος π.χ. 40-43-45-48-50 cm, 38 και 46 cm μόνο για το μπλε χρώμα)

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα αμαξίδιο **ARDEA ONE** by Moretti S.p.A. κατασκευασμένο για τη μετακίνηση ατόμων με κινητικά προβλήματα τόσο εντός όσο και εκτός σπιτιού, σε ταξίδια ή σε απλές δραστηριότητες. Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιέχει μικρές συμβουλές για τη σωστή χρήση του βοηθήματος που επιλέξατε και πολύτιμες συμβουλές για την ασφάλειά σας. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το σύνολο αυτού του εγχειριδίου πριν χρησιμοποιήσετε το αμαξίδιο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης, όπου θα σας βοηθήσουν και θα σας συμβουλευθούν σωστά.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του αμαξιδίου δεν έχουν υποστεί ζημιά κατά την αποστολή. Σε περίπτωση βλάβης μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν και επικοινωνήστε με τον έμπορο για περαιτέρω οδηγίες.

3. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτό το αναπηρικό αμαξίδιο προορίζεται για την μετακίνηση ατόμων με κινητικά προβλήματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτοκινούμενο (εάν είναι εξοπλισμένο με μεγάλους πίσω τροχούς) ή με τη βοήθεια χειριστή.

Σε όλες τις περιπτώσεις, ωστόσο, απαιτείται η παρέμβαση χειριστή για τις διάφορες ρυθμίσεις που απαιτούνται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



- Απαγορεύεται η χρήση του παρακάτω ιατροτεχνολογικού προϊόντος για σκοπούς άλλους από αυτούς που ορίζονται στο παρακάτω εγχειρίδιο.
- Η Moretti S.p.A. δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση της συσκευής ή από χρήση άλλη από αυτή που ορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στη συσκευή και στο ακόλουθο εγχειρίδιο χωρίς προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωση των χαρακτηριστικών της.

4. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η MORETTI S.p.A. δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα προϊόντα που κατασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά από την ίδια τη MORETTI S.p.A. και αποτελούν μέρος της οικογένειας αναπηρικών αμαξιδίων ARDEA ONE συμμορφώνονται με τις ισχύουσες διατάξεις του κανονισμού 2017/745 για τα ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ της 5ης Απριλίου 2017.

Για τον σκοπό αυτό, η MORETTI SpA εγγυάται και δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη τα ακόλουθα:











1. Τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα πληρούν τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων όπως ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού 2017/745 όπως ορίζεται στο παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού.
2. Τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.
3. Τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ.
4. Τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα διατίθενται στην αγορά σε ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ συσκευασία.
5. Τα εν λόγω τεχνολογικά προϊόντα πρέπει να θεωρούνται ότι ανήκουν στην κατηγορία I σύμφωνα με το παράρτημα VIII του εν λόγω κανονισμού.
6. Η MORETTI SpA διατηρεί και θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, για τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία κατασκευής της τελευταίας παρτίδας, την τεχνική τεκμηρίωση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τον κανονισμό 2017/745.

Σημείωση: Οι πλήρεις κωδικοί προϊόντων, ο κωδικός μητρώου του Κατασκευαστή (SRN), ο βασικός κωδικός UDI-DI και τυχόν αναφορές σε πρότυπα που χρησιμοποιούνται αναφέρονται στη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ που εκδίδει και καθιστά διαθέσιμη η MORETTI S.p.A μέσω των καναλιών της.

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Για τη σωστή χρήση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, ανατρέξτε προσεκτικά στο παρακάτω εγχειρίδιο.
- Για τη σωστή χρήση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος να συμβουλευέστε πάντα τον γιατρό ή τον θεραπευτή σας.
- Κρατήστε το ιατροτεχνολογικό προϊόν μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας καθώς η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από χαρτόνι.
- Η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του ιατροτεχνολογικού προϊόντος καθορίζεται από τη φθορά των εξαρτημάτων που δεν επισκευάζονται ή/και δεν αντικαθίστανται.
- Να είστε πάντα πολύ προσεκτικοί με την παρουσία κινούμενων εξαρτημάτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν παγίδευση άκρων και σωματικές βλάβες.
- Να είστε πάντα προσεκτικοί με την παρουσία παιδιών.
- Για να σηκώσετε σωστά το αμαξίδιο, πρέπει να το κλείσετε ακολουθώντας τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου και στη συνέχεια να το πιάσετε από τις λαβές.
- Μην σηκώνετε το αναπηρικό αμαξίδιο από αφαιρούμενα μέρη που μπορεί να ξεκολλήσουν κατά λάθος κατά την ανύψωση.
- Ο χρήστης ή/και ο ασθενής θα πρέπει να αναφέρει κάθε σοβαρό ατύχημα που συνέβη σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό προϊόν στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

6. ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ


	Κωδικός προϊόντος
	Μοναδικό αναγνωριστικό του ιατροτεχνολογικού προϊόντος
	Σειριακός αριθμός
	Σήμανση CE
	Κατασκευαστής
	Παρτίδα παραγωγής
	Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
	Όροι διάθεσης
	Μέγιστο υποστηριζόμενο βάρος

7. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**7.1 Προβολή και λίστα εξαρτημάτων**


Ανάλογα με το μοντέλο αμαξιδίου που θα επιλέξετε, αυτά είναι τα στοιχεία που θα το απαρτίζουν:




A - Σκελετός βάσης αμαξιδίου
B - Σετ κλειδιών για συναρμολόγηση

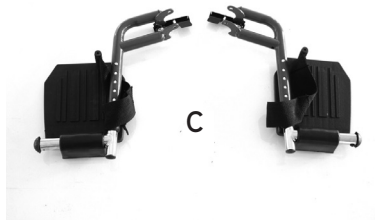


C - Πλευρικά υποπόδια

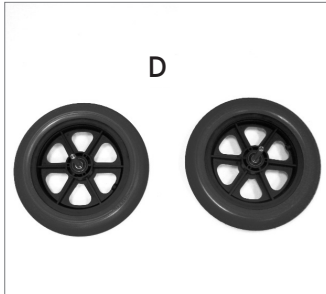

D - Μικροί πίσω τροχοί (διάμετρος 30 cm)
μοντέλο μεταφοράς

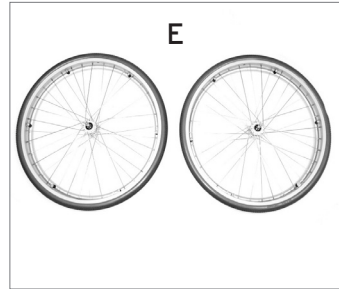

E - Μεγάλοι πίσω τροχοί (διάμετρος 60 cm)
αυτοκινούμενο μοντέλο

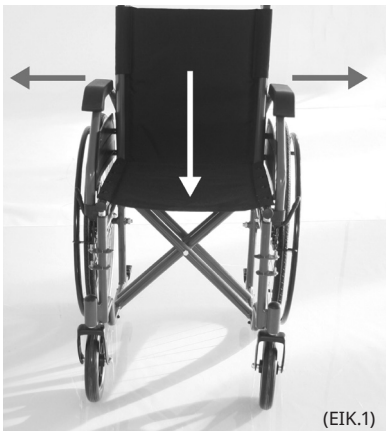
8. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ**8.1 Άνοιγμα**

(ΕΙΚ.1)

Σημείωση: Ανατρέξτε στις γενικές προειδοποιήσεις του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών χρήσης.

- Πιάστε τους σωλήνες των χειρολαβών και τραβήξτε προς τα έξω πιέζοντας το κάθισμα προς τα κάτω προσέχοντας να ανοίξει πλήρως το αμαξίδιο (Εικ.1)

8.2 Κλείσιμο

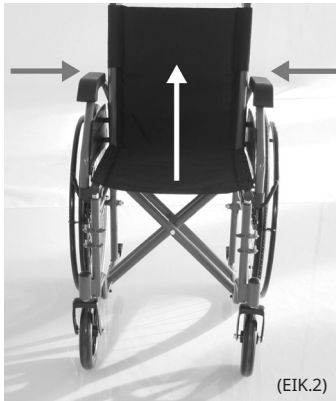

(EIK.2)

- Σηκώστε δυνατά το κάθισμα και κλείστε το αμαξίδιο φέρνοντας τις δύο λαβές ώθησης ξανά κοντά (EIK.2)

8.3 Εγκατάσταση/αφαίρεση υποβραχιόνων

CP100B-xx / CP100R-xx / CP103R-xx / CP104-xx / CP105-xx / CP500B-xx / CP500R-xx / CP505-xx



(EIK.3)



(EIK.4)

Εικόνες για επεξηγηματικούς σκοπούς

- Τοποθετήστε τα υποβραχιόνια στην πίσω σύνδεση, στη συνέχεια αναποδογυρίστε τα προς τα εμπρός και επίσης συνδέστε τα στο μπροστινό στήριγμα (EIK.3)
- Για την αφαίρεση πιέστε τον μπροστινό μοχλό απελευθέρωσης, στη συνέχεια αναποδογυρίστε τα υποβραχιόνια προς τα πίσω και τραβήξτε την πίσω λαβή απελευθέρωσης για να τα αφιρέσετε (EIK.4)

8.4 Εγκατάσταση/αφαίρεση πλευρικών υποποδίων ή υποποδίων που ανυψώνονται



(EIK.5)

- Για την εγκατάσταση τόσο πλευρικών υποποδίων όσο και αυτών που ανυψώνονται, ευθυγραμμίστε τις σπές των υποστηριγμάτων με τους αντίστοιχους πείρους στο σκελετό του αμαξώματος και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το υποπόδιο προς τα μέσα, συνδέοντας σωστά το μοχλό ασφάλισης στον σκελετό του αμαξιδίου (EIK.5)
- Για την αφαίρεση αποσυνδέστε το μοχλό του υποποδίου από τον σκελετό του αμαξιδίου, στη συνέχεια περιστρέψτε το προς τα έξω, τραβήξτε το προς τα πάνω

8.5 Ρύθμιση των πλευρικών υποπόδιων

(ΕΙΚ.6)



- Για να ρυθμίσετε το μήκος των υποπόδιων, ξεκλειδώστε τον αριστερό μοχλό ασφαλείας που βρίσκεται στο κάτω μέρος, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί, σύρετε το σωλήνα του υποπόδιου μέχρι να ενεργοποιηθεί και πάλι το κουμπί στην επιθυμητή οπή. Στη συνέχεια, ασφαλίστε ξανά τον μοχλό ασφαλείας. (ΕΙΚ.6)

8.6 Ρύθμιση υποπόδιων που ανυψώνονται (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)



- Για να ρυθμίσετε το μήκος των υποπόδιων, ξεκλειδώστε τον αριστερό μοχλό ασφαλείας που βρίσκεται στο κάτω μέρος, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί, σύρετε το σωλήνα του υποπόδιου μέχρι να ενεργοποιηθεί και πάλι το κουμπί στην επιθυμητή οπή. Στη συνέχεια, ασφαλίστε ξανά τον μοχλό ασφαλείας. ΕΙΚ.7 (av.P)
- Για να ρυθμίσετε την κλίση των υποπόδιων ενεργοποιήστε το μοχλό που φαίνεται στην ΕΙΚ.7 (av.L), στη συνέχεια αφού βρείτε τη σωστή ρύθμιση αφήστε το μοχλό για να ασφαλίσετε οριστικά τα υποπόδια.

8.7 Εγκατάσταση/αφαίρεση μικρών πίσω τροχών (μόνο για το GO!)

Οι πίσω τροχοί διαμέτρου 30 cm πρέπει να τοποθετούνται στην τελευταία οπή στο κάτω μέρος του σκελετού



(ΕΙΚ.8)

Τροχοί με σταθερό πείρο (μόνο για το GO!)

- Τοποθετήστε τον μικρό τροχό και ασφαλίστε τον με το παξιμάδι που παρέχεται
- Για την αφαίρεση ξεβιδώστε το παξιμάδι στερέωσης, τραβήξτε τον τροχό τραβώντας τον προς τα έξω

Εικόνα για επεξηγηματικούς σκοπούς

8.8 Ρύθμιση των φρένων με μικρούς πίσω τροχούς (μόνο για το GO!)



(EIK.9)

- Με τους πίσω τροχούς διαμέτρου 30 cm, το φρένο πρέπει να τοποθετείται στο τμήμα του σκελετού όπως φαίνεται στην (EIK.9)

Σημείωση: Προσαρμόστε την απόσταση του ολισθητήρα από τον τροχό έτσι ώστε όταν το φρένο ενεργοποιηθεί να μπορεί να ασκήσει πίεση τέτοια ώστε να κλειδώσει τον τροχό με ασφάλεια.

Εικόνα για επεξηγηματικούς σκοπούς

8.9 Εγκατάσταση/αφαίρεση των μεγάλων πίσω τροχών (μόνο για το START/START2 και START3)

Οι οπίσθιοι τροχοί διαμέτρου 60 cm πρέπει να τοποθετούνται στη μεσαία οπή στον σκελετό, και στην άνω οπή μεταξύ των 2 που υπάρχουν στο START3 (CP104-xx)



(EIK.10)

Στην περίπτωση τροχών με ταχεία αποσύνδεση (μόνο για START2 και START3)

- Αφαιρέστε τα πλαστικά καπάκια από την οπή και τοποθετήστε τους τροχούς πιέζοντας προς τον σκελετό μέχρι να ενεργοποιηθεί σωστά η διάταξη αυτόματης ασφάλισης (EIK.10)
- Για την αφαίρεση αρκεί να πατήσετε το κουμπί στο κέντρο του κύκλου του τροχού για να απελευθερώσετε την ασφάλιση, τραβήξτε τον τροχό προς τα έξω (EIK.10)

Στην περίπτωση τροχών με σταθερό πέδρο (μόνο για το START)

- Τοποθετήστε τον μεγάλο τροχό και ασφαλίστε τον με το παξιμάδι που παρέχεται
- Για την αφαίρεση ξεβιδώστε το παξιμάδι στερέωσης, τραβήξτε τον τροχό τραβώντας τον προς τα έξω

8.10 Ρύθμιση των φρένων με μεγάλους πίσω τροχούς (μόνο για το START/START2 και START3)



(EIK.11)

- Με τους πίσω τροχούς διαμέτρου 60 cm, το φρένο πρέπει να τοποθετηθεί στο ραβδωτό τμήμα του σκελετού όπως φαίνεται στην (EIK.11), μπλοκάροντας τον ολισθητήρα του φρένου μέσω των δύο κοχλιωτών βιδών στο στήριγμα

Σημειώσεις: Ρυθμίστε την απόσταση του ολισθητήρα από τον τροχό έτσι ώστε όταν το φρένο ενεργοποιηθεί να μπορεί να ασκήσει πίεση τέτοια ώστε να κλειδώσει τον τροχό με ασφάλεια.

9. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

- Ελέγχετε πάντα την κατάσταση φθοράς των εμπλεκόμενων μηχανικών μερών για να διασφαλίσετε ότι το ιατροτεχνολογικό προϊόν σας χρησιμοποιείται με απόλυτη ασφάλεια για ανθρώπους και πράγματα
- Να ελέγχετε τη σωστή συναρμολόγηση της συσκευής, με ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή τοποθέτηση των πίσω τροχών
- Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα είναι πλήρως ανοιχτό στην τελική θέση ασφάλισης (αν όχι, πιέστε κι άλλο το κάθισμα με δύναμη κάτω προς τα κάτω, προς τον σκελετό)
- Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του φρένου στους πίσω τροχούς

10. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Το αμαξίδιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κάθισμα σε μηχανοκίνητα οχήματα.
- Πάντα να βεβαιώνετε ότι ο χειρισμός του φρένου είναι καλά ρυθμισμένος και λειτουργεί
- Συνιστάται προσοχή στα δάχτυλα καθώς μπορεί να παγιδευτούν σε ορισμένα μέρη όπως οι τροχοί ή τα φρένα κατά τη χρήση του αμαξιδίου
- Υπενθυμίζεται ότι η θερμοκρασία της επιφάνειας του καρτσιού μπορεί να αυξηθεί όταν εκτίθεται σε εξωτερικές πηγές θερμότητας, όπως το ηλιακό φως

11. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σημείωση: Ανατρέξτε στις γενικές προειδοποιήσεις του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών χρήσης



ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Να ανεβαίνετε και να κατεβαίνετε μόνοι σας από το αμαξίδιο είναι δυνητικά επικίνδυνο: Να το κάνετε μόνο αν είστε σωματικά ικανοί και με προσοχή
- Μην ακουμπάτε στα αποσπώμενα μέρη, προτιμήστε το σκελετό του καθίσματος

ΜΗ ΒΑΖΕΤΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΤΑ ΥΠΟΠΟΔΙΑ ΟΤΑΝ ΑΝΕΒΑΙΝΕΤΕ Ή ΟΤΑΝ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ!!!

11.1 Τοποθέτηση στο αμαξίδιο

1. Πλησιάστε το αμαξίδιο όσο το δυνατόν περισσότερο ώστε να το τοποθετήσετε δίπλα σας
2. Ασφαλίστε τα φρένα των πίσω τροχών. Για να διευκολύνετε όσο το δυνατόν περισσότερο την τοποθέτηση στο αμαξίδιο, συνιστάται να αφαιρέσετε το υποβραχιόνιο από την πλευρά την οποία θα χρησιμοποιήσετε.
3. Στηριχτείτε στη δομή του σκελετού με τα χέρια σας και στη συνέχεια κατεβείτε αργά προς το κάθισμα.

11.2 Κατέβασμα από το αμαξίδιο

1. Πλησιάστε όσο το δυνατόν πιο κοντά σε ένα νέο κάθισμα
2. Ασφαλίστε τα φρένα των πίσω τροχών. Για να διευκολύνετε όσο το δυνατόν περισσότερο το κατέβασμα από το αμαξίδιο, συνιστάται να αφαιρέσετε το υποβραχιόνιο από την πλευρά την οποία θα χρησιμοποιήσετε.
3. Ακουμπήστε τα χέρια σας στο σκελετό του καθίσματος στο οποίο πρόκειται να μετακινηθείτε και γλιστρήστε αργά προς αυτό.

11.3 Σκαλοπάτια και ανομοιομορφίες (συμβουλές για το πώς να τα αντιμετωπίσετε καλύτερα μόνοι σας)



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι τεχνικές αυτές ισχύουν μόνο για έμπειρους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συνιστάται να ζητήσετε βοήθεια από βοηθό!

ΑΝΟΔΟΣ

Σταθείτε στην άκρη του πεζοδρομίου ή του σκαλοπατιού που πρέπει να περάσετε.

Ισορροπήστε το αμαξίδιο στους πίσω τροχούς ώστε να σηκώσετε τους μπροστινούς τροχούς όσο χρειάζεται για να τους ακουμπήσετε στο εμπόδιο που πρέπει να περάσετε. Γείρετε τον κορμό προς τα εμπρός και σπρώξτε δυνατά προς τα εμπρός τη χειρολαβή που υπάρχει στους πίσω τροχούς. Συνεχίστε να πιέζετε μέχρι οι πίσω τροχοί να ανέβουν πάνω από το εμπόδιο.

ΚΑΘΟΔΟΣ

Για να κατεβείτε από διαφορετικό επίπεδο, κάντε ακριβώς την αντίστροφη διαδικασία. Τοποθετήστε τον εαυτό σας με το πίσω μέρος του αμαξιδίου μπροστά από το επίπεδο που πρέπει να περάσετε, κρατήστε καλά τη χειρολαβή των πίσω τροχών και στη συνέχεια κατεβείτε αργά το σκαλοπάτι ή το εμπόδιο. Στη συνέχεια, ισορροπήστε το αμαξίδιο στους πίσω τροχούς ώστε να σηκώσετε ελαφρά τους μπροστινούς τροχούς και να ολοκληρώσετε απαλά την κάθοδο.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε αυτή την τεχνική σε διαφορά επιπέδου μεγαλύτερη των 10 εκ.!!!

11.4 Χρήση των υποβραχιόνων

Τα υποβραχιόνια μπορούν να είναι μόνο αναδιπλούμενα, μόνο αποσπώμενα ή αναδιπλούμενα και αποσπώμενα:

Αναποδίπλωση του υποβραχιόνιου - Αυτή η λειτουργία είναι πολύ βολική για να ανεβείτε ή να κατεβείτε από το αμαξίδιο. Για να αναδιπλώσετε το υποβραχιόνιο, απλά πιέστε τον μπροστινό μοχλό απελευθέρωσης και περιστρέψτε το προς τα πίσω.

11.5 Χρήση των τροχών αυτοκίνησης

Οι μεγάλοι πίσω τροχοί (60 cm) χρησιμεύουν για να οδηγούν το αμαξίδιο με ώθηση. Για να γίνει αυτό, κρατήστε τη χειρολαβή που υπάρχει επάνω στον τροχό και σπρώξτε το προς την κατεύθυνση που επιθυμείτε.

11.6 Χρήση μικρών τροχών

Οι μικροί πίσω τροχοί (30 cm) προορίζονται για την οδήγηση του αναπηρικού αμαξιδίου με τη βοήθεια χειριστή μέσω των χειρολαβών των λαβών του αναπηρικού αμαξιδίου.

11.7 Χρήση μικρών τροχών για στενά περάσματα (της σειράς σε μοντέλα με ταχεία αποσύνδεση)

Αυτός ο τύπος τροχών χρησιμεύει αποκλειστικά για να επιτρέπει τη σύντομη μετακίνηση του αμαξιδίου με σκοπό τη διέλευση σε ιδιαίτερα στενούς χώρους (π.χ. πόρτες ανελκυστήρα). Για να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους τροχούς, πρέπει να σηκώσετε το αμαξίδιο για να βγάλετε τους πίσω τροχούς, στη συνέχεια να το σπρώξετε έτσι ώστε να στηριχθεί στους μικρούς τροχούς και στη συνέχεια να επαναποθετήσετε τους πίσω τροχούς.

11.8 Μεταφορά με μέσα μετακίνησης

Το αμαξίδιο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μεταφέρεται εύκολα. Μόλις αφαιρεθούν τα υποπόδια και τα υποβραχιόνια, μπορεί να κλείσει και να τοποθετηθεί άνετα, για παράδειγμα, στο πορτ-μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου. Εάν δεν είναι δυνατό για λόγους χώρου, τοποθετήστε το αμαξίδιο μπροστά από το πίσω κάθισμα έτσι ώστε να είναι σταθερό και να μην μπορεί να ανατραπεί ή να γλιστρήσει. Εάν είναι δυνατόν, ασφαλίστε το αμαξίδιο με τη ζώνη ασφαλείας του οχήματος.

12. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα της σειράς **ARDEA ONE** by Moretti S.p.A. κατά τη διάθεσή τους στην αγορά ελέγχονται διεξοδικά και φέρουν σήμανση CE. Για την ασφάλεια του ασθενούς και του ιατρού συνιστάται να ελέγχεται από τον κατασκευαστή ή από εγκεκριμένο εργαστήριο, τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια, η καταλληλότητα χρήσης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Σε περίπτωση επισκευής πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα. Πριν από τη χρήση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος πραγματοποιήστε όλους τους ελέγχους που προτείνονται στην παράγραφο «**ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ**» του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών χρήσης. Τα αμαξίδια **ARDEA ONE** χρειάζονται λίγες και στοιχειώδεις τακτικές συντηρήσεις, που αναφέρονται παρακάτω:

ικανότητα πέδησης	μηνιαία
καθαριότητα του καθίσματος	ανάλογα με τις ανάγκες

13. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

13.1 Καθαρισμός επενδύσεων και μαξιλαριών

Οι επενδύσεις και τα μαξιλάρια είναι κατασκευασμένα από νάilon. Και μπορούν να καθαριστούν με ουδέτερο σαπούνι και νερό.

13.2 Καθαρισμός σκελετού και μεταλλικών μερών

Για τον σκελετό και τα μεταλλικά μέρη μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ουδέτερο σαπούνι και νερό και στη συνέχεια να στεγνώσετε με ένα μαλακό πανί ώστε να μην γρατσουνιστεί η βαφή του πλαισίου.

13.3 Καθαρισμός τροχών και φρένων

Με τον ίδιο τρόπο και οι τροχοί μπορούν να καθαρίζονται με ουδέτερο σαπούνι και νερό. Δώστε μεγάλη προσοχή στο στέγνωμα: μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο να χρησιμοποιήσετε το αμαξίδιο με τους τροχούς ακόμα υγρούς.

13.4 Απολύμανση

Εάν πρέπει να γίνει απολύμανση του αμαξιδίου χρησιμοποιήστε ένα κοινό απολυμαντικό καθαριστικό.

Σημείωση Αποφύγετε ρητά τη χρήση όξινων, αλκαλικών ή διαλυτικών προϊόντων όπως η ακετόνη ή το διαλυτικό.

14. ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Κατά την απόρριψη της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα συνήθη συστήματα μεταφοράς στερεών αστικών αποβλήτων. Συνιστάται η απόρριψη του αμαξιδίου μέσω των δημοτικών «οικολογικών νησίδων» για τις προβλεπόμενες εργασίες ανακύκλωσης των χρησιμοποιούμενων υλικών.




















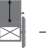










15. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Για ανταλλακτικά και εξαρτήματα, ανατρέξτε αποκλειστικά στον γενικό κατάλογο Moretti.

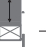16. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

16.1 Διαστάσεις

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

Διαστάσεις σε cm																
CP100B-38								38								56
CP100B-40								40								58
CP100B-43	103	85	43	91	75	50	42-56	43	43			60,5				120
CP100B-45								45				26	17,5	60	20	-
CP100B-46								46								64
CP100B-48								48								65
CP100R-40								40								58
CP100R-43	103	85	43	91	75	50	42-56	43	43			26,5	17,5	60	20	-
CP100R-45								45								63
CP100R-48								48								65
CP103R-40								40								58
CP103R-43								43								60,5
CP103R-45	103	85	40	91	75	50	42-56	45	43			26,5	19	60	20	-
CP103R-48								48								66
CP103R-50								50								68
CP104-40								40								58
CP104-43								43								60,5
CP104-46	103	85	40	91	75	50	42-56	46	43			26,5	19	60	20	-
CP104-48								48								66
CP104-50								50								68
CP105-40								40								58
CP105-43								43								60,5
CP105-46	103	85	40	91	75	50	42-56	46	43			26,5	19	60	20	-
CP105-48								48								66
CP105-50								50								68
Διαστάσεις σε cm																
CP500B-40								40								58
CP500B-43								43								61
CP500B-45	103	75	43	91	73	50	42-56	45	43			26	15	30	20	-
CP500B-46								46								64
CP500B-48								48								65
CP500R-40								40								58
CP500R-43	103	75	43	91	73	50	42-56	43	43			26,5	15	30	20	-
CP500R-45								45								63
CP505-40								40								58
CP505-43								43								61
CP505-45	103	75	43	91	73	50	42-56	45	43			26	15	30	20	-
CP505-48								48								65
CP505-50								50								67

*Οι μετρήσεις μπορεί να διαφέρουν κατά ± 0,5 εκ.

16.2 Τεχνικές προδιαγραφές

- Ατσάλινος σκελετός
- Μέγιστο φορτίο για CP100-xx, CP500-xx: 120 kg
- Μέγιστο φορτίο για CP103R-xx, CP104-xx, CP105-xx, CP505-xx: 130 kg
- Μπροστινοί τροχοί από PVC διαμέτρου 20 cm για CP100-xx
- Μπροστινοί τροχοί από PU διαμέτρου 20 cm για CP103R-xx, CP104-xx, CP105-xx, CP500-xx, CP505-xx
- Πίσω τροχοί από PU διαμέτρου 60 cm για CP100-xx, CP103R-xx, CP104-xx
- Πίσω τροχοί από PU διαμέτρου 30 cm για CP105-xx, CP500-xx, CP505-xx
- Κάθισμα, πλάτη και επένδυση με μαξιλάρια υποβραχιόνιων από νάιλον
- Αντίσταση στην ανάφλεξη: Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την επένδυση και τα μαξιλάρια έχουν δοκιμαστεί με τις μεθόδους που καθορίζονται στο EN1021-1/2
- Πρότυπα αναφοράς: EN 12183
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας: -20C° / + 40C°
- Συνιστώμενη αποθήκευση: Φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος και πάντα μακριά από άμεσες πηγές θερμότητας όπως το ηλιακό φως. (συνιστώμενη θερμοκρασία μεταξύ +10C°/+40C°)

17. ΕΓΓΥΗΣΗ

Όλα τα προϊόντα Moretti είναι εγγυημένα από ελαττώματα υλικού ή κατασκευής για περίοδο 2 (δύο) ετών από την ημερομηνία πώλησης του προϊόντος, εκτός από τυχόν εξαιρέσεις και περιορισμούς που καθορίζονται παρακάτω. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση κακής χρήσης, κατάχρησης ή τροποποίησης του προϊόντος και μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης. Η σωστή χρήση του προϊόντος αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Η Moretti δεν ευθύνεται για τυχόν προκύπτουσες ζημιές, σωματικές βλάβες ή οτιδήποτε άλλο που προκλήθηκε ή σχετίζεται με την εγκατάσταση ή/και τη χρήση του εξοπλισμού που δεν συμμορφώνεται σχολαστικά με τις οδηγίες που αναφέρονται στα εγχειρίδια εγκατάστασης, τοποθέτησης και χρήσης. Η Moretti δεν εγγυάται τα προϊόντα Moretti έναντι ζημιών ή ελαττωμάτων υπό τις ακόλουθες συνθήκες: φυσικές καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένες εργασίες συντήρησης ή επισκευής, ζημιές που προκύπτουν από προβλήματα με την παροχή ρεύματος (κατά περίπτωση), χρήση ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που δεν παρέχονται από τη Moretti, μη τήρηση των οδηγιών και των οδηγιών χρήσης, μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις, ζημιές κατά τη μεταφορά (εκτός από την αρχική αποστολή από τη Moretti) ή μη εκτέλεση της συντήρησης όπως υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο. Δεν καλύπτονται από αυτή την εγγύηση τα αναλώσιμα εξαρτήματα εάν η ζημία οφείλεται στην κανονική χρήση του προϊόντος.

17.1 Επισκευές

Επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης: Σε περίπτωση που ένα προϊόν Moretti παρουσιάζει ελαττώματα υλικού ή κατασκευής κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η Moretti θα αξιολογήσει με τον πελάτη εάν το ελάττωμα του προϊόντος καλύπτεται από την εγγύηση. Η Moretti, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει το προϊόν στο πλαίσιο της εγγύησης, είτε σε συγκεκριμένο αντιπρόσωπο της Moretti είτε στις δικές της εγκαταστάσεις. Το κόστος εργασίας που σχετίζεται με την επισκευή του προϊόντος μπορεί να βαρύνει τη Moretti εάν διαπιστωθεί ότι η επισκευή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εγγύησης. Μια επισκευή ή αντικατάσταση δεν ανανεώνει ούτε παρατείνει την εγγύηση.

Επισκευή προϊόντος που δεν καλύπτεται από την εγγύηση: Μπορείτε να επιστρέψετε, για επισκευή, ένα προϊόν που δεν καλύπτεται από την εγγύηση μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση από την εξυπηρέτηση πελατών της Moretti. Το κόστος εργασίας και αποστολής που σχετίζεται με μια επισκευή που δεν καλύπτεται από την εγγύηση θα βαρύνει πλήρως τον πελάτη ή τον έμπορο. Οι επισκευές σε προϊόντα που δεν καλύπτονται από την εγγύηση είναι εγγυημένες για 6 (έξι) μήνες από την ημέρα παραλαβής του επισκευασμένου προϊόντος.

Μη ελαττωματικά προϊόντα: Ο πελάτης θα ειδοποιηθεί εάν, μετά από εξέταση και δοκιμή ενός επιστρεφόμενου προϊόντος, η Moretti καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό. Το προϊόν θα επιστραφεί στον πελάτη και θα επιβαρυνθεί με το κόστος αποστολής λόγω της επιστροφής.

17.2 Ανταλλακτικά

Τα γνήσια ανταλλακτικά Moretti έχουν εγγύηση 6 (έξι) μηνών από την ημέρα παραλαβής του ανταλλακτικού.

17.3 Ρήτρες εξαιρέσης

Εκτός από όσα ορίζονται ρητά στην παρούσα εγγύηση και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Moretti δεν παρέχει άλλες δηλώσεις, εγγυήσεις ή προϋποθέσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων, εγγυήσεων ή προϋποθέσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης και μη παρεμβολής. Η Moretti δεν εγγυάται ότι η χρήση του προϊόντος Moretti θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. Η διάρκεια οποιασδήποτε σιωπηρής εγγύησης που μπορεί να επιβάλλεται από νομικές διατάξεις περιορίζεται στην περίοδο εγγύησης, εντός των ορίων των νομικών διατάξεων. Ορισμένα κράτη ή χώρες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στη διάρκεια μιας σιωπηρής εγγύησης ή την εξαίρεση ή τον περιορισμό τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών σε σχέση με προϊόντα για καταναλωτές. Σε αυτές τις χώρες ή κράτη ορισμένες εξαιρέσεις ή περιορισμοί αυτής της εγγύησης μπορεί να μην ισχύουν για εσάς. Αυτή η εγγύηση υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Προϊόν _____

Ημερομηνία αγοράς _____

Μεταπωλητής _____

Οδός _____ Τοποθεσία _____

Πώληση _____

Οδός _____ Τοποθεσία _____

ΕΜΗΝΙΚΑ



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Τηλ. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Τηλ. +39 055 96 21 11
Φαξ. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com