

moretti®

MA DM330-333-335-342-343-345-346-347-348-350A_F_R-353A_F_R-360-365 01 A_LT_07-2026

SKENĒJIET QR KODU

VAIRĀK VALODĀM



LT ANEROĪDIE SFIGMOMANOMETRI
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

SATURS

1. Kodi	lpp. 3.
2. IEVADS	lpp. 3.
3. PAREDZĒTAIS NOLŪKS	lpp. 3.
4. VISPĀRĪGS APRAKSTS	lpp. 3.
4.1 Kas ir asinsspiediens?	lpp. 4.
4.2 Kāds ir normāls asinsspiediens?	lpp. 4.
4.3 Darbība	lpp. 4.
5. PIEMĒROJAMIE STANDARTI UN DIREKTĪVAS	lpp. 4.
6. VISPĀRĪGA DETAĻU MONTĀŽA	lpp. 4.
7. BRĪDINĀJUMI PAR LIETOŠANU	lpp. 4.
8. BRĪDINĀJUMI PAR ASINSSPIEDIENA MĒRĪŠANU	lpp. 5.
9. PAREIZAS MĒRĪŠANAS NOSACĪJUMI	lpp. 5.
10. LIETOŠANAS KĀRTĪBA	lpp. 5.
10.1 Manšetes izvēle	lpp. 6.
11. APKOPE UN KOPŠANA	lpp. 7.
12. TĪRĪŠANA	lpp. 7.
13. LIKVIDĒŠANAS NOSACĪJUMI	lpp. 8.
13.1 Vispārīgie likvidēšanas nosacījumi	lpp. 8.
14. REZERVES DAĻAS UN PIEDERUMI	lpp. 8.
15. TEHNISKIE RAKSTURLIELUMI	lpp. 8.
16. GARANTĪJA	lpp. 9.
16.1 Remonts	lpp. 9.
16.2 Rezerves daļas	lpp. 9.
16.3 Atbildības ierobežojumi	lpp. 10.



I klases medicīniskā ierīce ar mērīšanas funkciju

24/02/97 Likumdošanas dekrēts Nr. 46, ar ko īsteno EEK Direktīvu 93/42
un tās turpmākos grozījumus

1. Kodi

DM330	Standarta aneroīdais sfigmomanometrs
DM333	Standarta aneroīdais sfigmomanometrs ar fonendoskopu
DM335	Aneroīdais sfigmomanometrs ar manometru uz manšetes
DM342	Plaukstu tipa aneroīdais sfigmomanometrs - pilns komplekts ar trim manšetēm
DM343	Plaukstu tipa aneroīdais sfigmomanometrs ar divām caurulēm
DM345	Plaukstu tipa aneroīdais sfigmomanometrs ar lielu korpusu
DM346	Plaukstu tipa aneroīdais sfigmomanometrs ar lielu korpusu un fonendoskopu
DM347	Plaukstu tipa aneroīdais sfigmomanometrs ar trieciēnizturīgu korpusu
DM348	Abām rokām piemērots plaukstu tipa aneroīdais sfigmomanometrs
DM350A	Aneroīdais sfigmomanometrs - gaiši zilā krāsā
DM350F	Aneroīdais sfigmomanometrs - meža zaļā krāsā
DM350R	Aneroīdais sfigmomanometrs - sarkanā krāsā
DM353A	Aneroīdais sfigmomanometrs ar fonendoskopu - gaiši zilā krāsā
DM353F	Aneroīdais sfigmomanometrs ar fonendoskopu - meža zaļā krāsā
DM353R	Aneroīdais sfigmomanometrs ar fonendoskopu - sarkanā krāsā
DM360	Galda/sienas aneroīdais sfigmomanometrs
DM365	Aneroīdais sfigmomanometrs uz statīva

2. Ievads

Paldies, ka izvēlējāties LOGIKO by Moretti sērijas aneroīdo sfigmomanometru. LOGIKO by Moretti sfigmomanometri ir izstrādāti un izgatavoti, lai apmierinātu visas jūsu vajadzības un nodrošinātu praktisku, pareizu un drošu lietošanu. Šajā rokasgrāmatā sniegti visi ieteikumi jūsu izvēlētais ierīces pareizai lietošanai un vērtīgi padomi jūsu drošībai. Pirms aneroīda sfigmomanometra lietošanas ieteicams rūpīgi izlasīt visu šo rokasgrāmatu. Neskaidrību gadījumā sazinieties ar izplatītāju, kurš jums sniegs atbilstošu palīdzību un padomu.

3. Paredzētais nolūks

LOGIKO by Moretti sērijas aneroīdie sfigmomanometri ir asinsspiediena mērīšanas ierīces, kas darbojas pēc Riva Rocci/Korotkoff auskultācijas metodes.

UZMANĪBU!



- Šo ierīci aizliegts lietot nolūkiem, kas nav noteikti šajā rokasgrāmatā.
- Moretti S.p.A. neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem, ko izraisījuši ierīces nepareiza lietošana vai lietošana veidā, kas atšķiras no šajā rokasgrāmatā norādītā.
- Lai uzlabotu ierīces īpašības, ražotājs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas ierīcē un šajā rokasgrāmatā.

4. Vispārīgs apraksts

Aneroīdie sfigmomanometri ir pieejami divos modeļos:

- PLAUKSTAS TIPA ANEROĪDAIS SFIGMOMANOMETRS
- ANEROĪDAIS SFIGMOMANOMETRS AR ATSEVIŠĶU PUMPĒŠANAS BUMBIERI

Visi modeļi ir pieejami ar integrētu fonendoskopu. Plaukstu tipa modeļus var lietot ar vienu roku, jo pumpēšanas bumbieris un manometrs veido vienotu bloku. Aneroidais sfigmomanometrs ar atsevišķu pumpēšanas bumbieri ir klasisks aneroidais asinsspiediena mērītājs; Šī sistēma samazina ierīces kopējos izmērus līdz minimumam, nemainot tās tehniskos raksturlielumus un uzticamību.

4.1 Kas ir asinsspiediens?

Asinsspiediens ir spiediens, ko asinis rada uz asinsvadu sienām. Maksimālo spiedienu artērijās sirds cikla laikā sauc par SISTOLISKO spiedienu, bet zemāko — par DIASTOLISKO spiedienu.

4.2 Kāds ir normāls asinsspiediens?

Ir svarīgi zināt, ka arteriālais asinsspiediens ievērojami svārstās. Asinsspiediena līmenis ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Parasti arteriālais asinsspiediens vasarā ir zemāks, bet ziemā augstāks. Arteriālais asinsspiediens var mainīties atmosfēras spiediena ietekmē, un to būtiski ietekmē, piemēram, fiziska slodze, emocionāls uzbudinājums, stress, ēdienreizes, zāles, alkohols, smēķēšana, vecums utt. Ieteicams pierakstīt ikdienas mērījumu rezultātus, lai, konsultējoties ar ārstu, varētu atbilstoši noteikt jūsu organismam normālu asinsspiediena vērtību.

PIEZĪME. Asinsspiediens mainās atkarībā no vecuma, tādēļ konsultējieties ar ārstu, lai noteiktu jums normālu asinsspiediena vērtību. Nekādā gadījumā nedrīkst mainīt ārsta izrakstīto zāļu devu!

4.3 Darbība

Sfigmomanometri izmanto Riva Rocci/Korotkoff auskultācijas sistēmu. Mērīšanai nepieciešamo gaisa spiedienu manšetē rada ar pumpēšanas bumbieri. Gaisa izlaišanas vārsts ļauj precīzi regulēt gaisa izplūdi no manšetes, tādējādi nodrošinot mērīšanu. Katram manometram ir nolasīšanas skala ar mērījumu diapazonu no 0 līdz 300 mmHg (mmHg = dzīvsudraba staba milimetri), 2 mmHg iedaļām un lielākām iedaļām ik pēc 10 mmHg, lai atvieglotu nolasīšanu. Nolasījuma precizitāte visā diapazonā ir ± 3 mmHg. Katrs sfigmomanometrs tiek kalibrēts un pakļauts galīgajai pārbaudei.

5. Piemērojamie standarti un direktīvas

LOGIKO by Moretti sfigmomanometri ir izgatavoti saskaņā ar spēkā esošo standartu EN 81060-1 "Neinvasīvie sfigmomanometri. 1. daļa:" Prasības un testēšanas metodes neautomātiskam mērīšanas veidam.

6. Vispārīga detaļu montāža

ANEROĪDAIS SFIGMOMANOMETRS AR 2 CAURULĒM - Pievienojiet vienu gaisa kameras cauruli manometram, bet otru - pumpēšanas bumbierim ar spiediena regulēšanas vārstu.

PLAUKSTAS TIPĀ ANEROĪDAIS SFIGMOMANOMETRS AR 1 CAURULI - Pievienojiet gaisa kameras cauruli attiecīgajam plaukstu tipa aneroīdā sfigmomanometra savienojumam.

PLAUKSTAS TIPĀ ANEROĪDAIS SFIGMOMANOMETRS AR 2 CAURULĒM - Pievienojiet vienu gaisa kameras cauruli vienam no diviem plaukstu tipa sfigmomanometra savienojumiem. Pievienojiet otru cauruli otram sfigmomanometra savienojumam.

7. Brīdinājumi par lietošanu

- Lai ierīci lietotu pareizi, rūpīgi ievērojiet šīs rokasgrāmatas norādījumus;
- Vienmēr ievērojiet norādījumus par iegādāto izstrādājumu;
- Vienmēr glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā;
- Nekad nepalieliniet spiedienu virs 300 mmHg.

8. Brīdinājumi par asinsspiediena mērīšanu

- Parasti mērīšanai vienmēr izmantojiet kreiso roku;
- Pirms mērīšanas izvairieties no jebkādas fiziskas aktivitātes;
- Mērīšanas laikā neēdiet, nedzeriet un nekustieties;
- Nespiediet fonendoskopa galviņu ar pirkstiem. Tas var traucēt asinsspiediena nolasīšanu;
- Vienmēr veiciet asinsspiediena mērījumus vienā un tajā pašā laikā;
- Vienmēr pierakstiet mērījuma datumu un laiku.

9. Pareizas mērīšanas nosacījumi

Mērīšanas laikā pacientam ērti jāšēž klusā un tīrā telpā, muguru labi atbalstot un kājas nesakrustojot. Pacienta elkonis jānovieto uz galda tā, lai ierīce atrastos sirds augstumā. Manšetes centrs uz (kreisās) augšējās ekstremitātes jānovieto labā priekškambara līmenī. Rokai jābūt atsegtai. Ja apgērba piedurkne ir uzrotīta, tā nedrīkst nospīst roku. Mērīšanas laikā pacientam plauksta jātur pavērsta uz augšu, jāatslābinās, jāšēž nekustīgi un nedrīkst runāt. Pirms pirmā mērījuma veikšanas ieteicams 5 minūtes mierīgi sēdēt atslābinātā pozā.

Brīdinājumi par K5 toņa izmantošanu pieaugušo auskultācijā:

K5 ir punkts, kurā Korotkoff tonis vairs nav dzirdams.

Brīdinājumi par K4 toņa izmantošanu 3–12 gadus vecu bērnu auskultācijā:



K4 tonis mainās no skaidri dzirdamas pulsācijas uz apslāpētu skaņu.

Brīdinājumi par K5 toņa izmantošanu grūtnieču auskultācijā:

Ja K5 tonis nav dzirdams arī pie iztukšotas manšetes, jāizmanto K4 tonis.

10. Lietošanas kārtība

Lietotājam jāatrodas telpā ar patīkamu temperatūru. No kreisās rokas jānovelk apgērbs. Apsēdieties pie galda vai rakstāmgalda, kur roku var ērti izstiept. Novietojiet elkonī uz galda aptuveni vienā augstumā ar sirdi. Pavērsiet plaukstu uz augšu. Aptiniet manšeti ap kailu augšdelmu tā, lai manšetes centrs atrastos virs augšdelma artērijas. Manšetes apakšējai malai jāatrodas aptuveni 2–3 cm virs elkoņa locījuma. Pievelciet manšeti tā, lai tā cieši piegulētu rokai. Starp manšeti un roku jābūt iespējai ievietot vienu pirkstu.

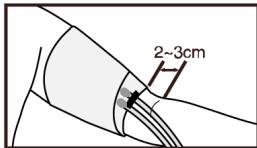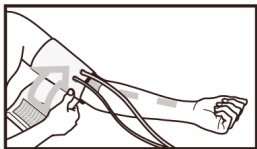

PIEZĪME. Nepievelciet manšeti pārāk cieši, citādi ievērojami samazināsies asinsrite. Novietojiet fonendoskopa galviņu (PAPILDAPRĪKOJUMS) zem manšetes centra aptuveni 3–4 cm attālumā no elkoņa locījuma.


PIEZĪME. Fonendoskopa galviņu nedrīkst pārāk cieši piespiest pie manšetes, citādi izmērītais diastoliskais spiediens būs neprecīzs.

Uzlieciet fonendoskopa ausu lokus, lai klausītos sirdspukstus. Pēc tam ar ierīces pumpēšanas bumbieri piepūstiet manšetes gaisa kameru. Vispirms pārliecinieties, ka gaisa izlaišanas vārsts ir aizvērts. Pēc tam iesūkņiet gaisu sistēmā, līdz spiediens ir aptuveni par 30 mmHg augstāks par parasto sistolisko spiedienu (ja asinsspiedienu mērāt pirmo reizi, piepūstiet līdz aptuveni 180 mmHg). Asinsspiediena mērīšanas laikā palieciet pilnīgi nekustīgi. Sāciet lēni izlaist gaisu no gaisa kameras, regulējot izplūdes vārstu tā, lai spiediens vienmērīgi samazinātos par aptuveni 2–3 mmHg sekundē. Klausieties fonendoskopā un vienlaikus vērojiet manometru. Kad skaidri dzirdami vismaz divi secīgi sirdspuksti, nolasītā vērtība ir maksimālais (SISTOLISKAIS) spiediens; kad šie sirdspuksti vairs nav dzirdami, nolasītā vērtība ir minimālais (DIASTOLISKAIS) spiediens. Kad noteikts arī diastoliskais spiediens, pilnībā atveriet gaisa izlaišanas vārstu, lai ātri atbrīvotu gaisa kameru no atlikušā spiediena. Pēc tam noņemiet fonendoskopu un manšeti. Neatstājiet manšeti piepūstu pārāk ilgi.

10.1 Manšetes izvēle

SVARĪGI: MANŠETES IZMĒRAM JĀBŪT PAREIZAM

Manšetes izmēra izvēlē noteicošais ir pacienta augšdelma apkārtmērs. Ierīces standarta komplektācijā ir pieaugušo manšete; tā ir piemērota augšdelma apkārtmēram no 26 līdz 36 cm. Citiem izmēriem jāizmanto šīs rokasgrāmatas tabulā norādītās manšetes.

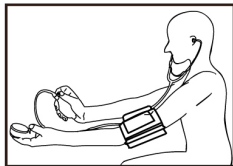

Modelis	Apraksts	Bez gaisa kameras	Ar gaisa kameru un 1 cauruli	Ar gaisa kameru un 2 caurulēm
Velcro aizdare, bez metāla gredzena	AUGŠSTILBA MANŠETE Manšetes izmēri L: 80 × 21 cm Ekstremitātes apkārtmērs Ø 42–57 cm	DR126	DR1438	DR125
	PERSONĀM AR APTAUKOŠANOS Manšetes izmēri L: 60 × 18 cm Ekstremitātes apkārtmērs Ø 32–47 cm	DR123	DR1435	DR1425
	PIEAUGUŠAJIEM Manšetes izmēri L: 51 × 14 cm Ekstremitātes apkārtmērs Ø 26–36 cm	DR120B	DR1433	DR1423
Āķu aizdare Bez metāla gredzena	PIEAUGUŠAJIEM Manšetes izmēri L: 50 × 14 cm Ekstremitātes apkārtmērs Ø 26–38 cm	DR124	DR1436	DR1426
Velcro aizdare Bez metāla gredzena	PUSAUDŽIEM Manšetes izmēri L: 48 × 10 cm Ekstremitātes apkārtmērs Ø 24–32 cm	DR119	DR1432	DR1422
	BĒRNIEM Manšetes izmēri L: 38 × 6,5 cm Ekstremitātes apkārtmērs Ø 13–26 cm	DR118	DR1431	DR1421
	JAUNDZIMUŠAJIEM Manšetes izmēri L: 22 × 4,5 cm Ekstremitātes apkārtmērs Ø 7–13 cm	DR117	DR1430	DR1420

Modelis	Apraksts	Bez gaisa kameras	Ar gaisa kameru un 1 cauruli	Ar gaisa kameru un 2 caurulēm
Velcro aizdare, ar metāla gredzenu	PERSONĀM AR APTAUKOŠANOS	-	DR314	-
	PIEAUGUŠAJIEM Manšetes izmēri L: 48,3 x 14 cm Ekstremitātes apkārtmērs Ø 26–36 cm	DR121B	DR1434	DR1424
Velcro aizdare, ar metāla gredzenu - ar fonendoskopu	PIEAUGUŠAJIEM Manšetes izmēri L: 48,3 x 14 cm Ekstremitātes apkārtmērs Ø 26–36 cm	DR122	DR1437	DR1427
Velcro aizdare, ar metāla gredzenu, PELĒKĀ krāsā	PIEAUGUŠAJIEM	-	DR1439	DR1429

Pieaugušo modelis ar D-Ring (tērauda gredzenu, kas ļauj manšeti aizvērt ar dubultu pārlocījumu) ir lieliski piemērots pašmērīšanai. Visas gaisa kameras ir izgatavotas no PVC.

11. Apkope un kopšana

LOGIKO by Moretti sērijas ierīces pirms laišanas tirgū tiek rūpīgi pārbaudītas un apgādātas ar CE marķējumu. Katrs sfigmomanometrs tiek kalibrēts un pakļauts pilnīgai galīgajai pārbaudei.

Pirms katras lietošanas reizes, ierīcei esot miera stāvoklī, pārbaudiet, vai aneroīdā sfigmomanometra ciparnīcas rādītājs atrodas pieļaujamajā ± 3 mmHg pielaišanas zonā (to norāda izteiktāks graduētās skalas marķējums nedaudz virs un zem nulles). Ierīces, kuru rādījums pārsniedz ± 3 mmHg pielaidi, ir jāpārkalibrē. Lai saņemtu kvalificētu tehnisko palīdzību, sazinieties ar savu izplatītāju. Remonta gadījumā drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus.

SVARĪGI NORĀDĪJUMI:

Īpaši ņemiet vērā šādus faktorus

- Spiediens nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 300 mmHg;
- Neatstāji ierīci mitrā vidē;
- Nenometiet ierīci (pretējā gadījumā tās pareiza darbība vienmēr jāpārbauda pilnvarotā laboratorijā);
- Neatstāji ierīci tiešos saules staros;
- Sargāji no jebkādiem siltuma avotiem;
- Nekādā gadījumā nepalieliniet spiedienu virs 300 mmHg;
- Mērīšanas laiks nedrīkst pārsniegt 2 minūtes;
- Neatkārtojiet mērījumu, pirms nav pagājušas vismaz 5 minūtes;
- Aizsargāji instrumentu no spēcīgiem satricinājumiem un triecieniem;
- Sargāji gumijas detaļas no bojājumiem ar asiem un smailiem priekšmetiem;
- Uzglabāji temperatūrā no 10 °C līdz 40 °C un pie relatīvā mitruma, kas nepārsniedz 85 %.

12. Tīrīšana

MANOMETRS - Izmantoji tikai mikstu, sausu drānu.

PUMPŠANAS BUMBIERIS AR VĀRSTU - Izmantoji tikai mikstu, samitrinātu drānu un pēc tam rūpīgi nosusiniet.

MANŠETE - Lai manšeti pareizi iztīrītu, ieteicams izņemt tās gaisa kameru un pēc tam mazgāt manšeti ar siltu ūdeni un neitrālām ziepēm.

GAISA KAMERA - Mazgājiet ar siltu ūdeni un neitrālām ziepēm, nepieļaujot ūdens iekļūšanu tās iekšpusē. Ja gaisa kamerā ir iekļuvusi neliels ūdens daudzums, pirms lietošanas ļaujiet tai pilnīgi nožūt, caurules paveršot uz leju, lai atvieglotu ūdens izplūdi.

FONENDOSKOPS - Izmantojiet tikai mikstu, samitrinātu drānu un pēc tam rūpīgi nosusiniet. Pārējās detaļas tīriet ar siltu ūdeni un neitrālām ziepēm, pēc tam rūpīgi nosusiniet.

13. Likvidēšanas nosacījumi



13.1 - Vispārīgie likvidēšanas nosacījumi

Likvidējot ierīci, nekādā gadījumā neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Ierīci ieteicams nodot pašvaldības atkritumu šķirošanas laukumā, lai izmantotos materiālus varētu pārstrādāt.

14. Rezerves daļas/piederumi

Informāciju par rezerves daļām un piederumiem skatiet MORETTI vispārīgajā katalogā.

15. Tehniskie raksturojumi

Modelis	Manometrs	Ciparnīca	Svars	Ciparnīcas skala	Manšete	Pumpēšanas bumbieris	Korpuss	Vārsts
DM330	Ø 50 mm	Ø 45 mm	363 g	Graduēta ar 2 mmHg intervālu (mazās iedaļās), lielākās iedaļās (numurētas ik pēc 20 mmHg)	2 caurules	PVC	No viegla sakau-sējuma, krāsots zilā krāsā	Manuāls, skrūvējams
DM333	Ø 50 mm	Ø 45 mm	478 g				No viegla sakau-sējuma, krāsots zilā krāsā, ar zilu gumijas aizsarg-gredzenu	
DM335	Ø 50 mm	Ø 45 mm	320 g		1 caurule		No hromēta vieglā sakau-sējuma	
DM342	Ø 60 mm	Ø 57 mm	986 g		1 caurule		No hromēta metāla	
DM343	Ø 67 mm	Ø 57 mm	606 g		2 caurules		No hromēta metāla	
DM345	Ø 65 mm	Ø 60 mm	430 g		1 caurule		No hromēta vieglā sakau-sējuma	Manuāls, skrūvējams
DM346	Ø 65 mm	Ø 60 mm	446 g		2 caurules		No triecienizturīga materiāla	
DM347	Ø 65 mm	Ø 57 mm	350 g		1 caurule		No hromēta metāla	
DM348	Ø 67 mm	Ø 57 mm	426 g				No viegla sakau-sējuma, krāsots melnā krāsā	
DM350A	Ø 50 mm	Ø 50 mm	483 g		2 caurules		2 caurules	
DM350F								
DM350R								
DM353A	Ø 50 mm	Ø 50 mm	603 g		2 caurules		1 caurule	
DM353F								
DM353R								
DM360	Kvadrātveida, 145 x 145 mm	Kvadrātveida, 150 x 150 mm	725 g					
DM365	Kvadrātveida, 145 x 145 mm	Kvadrātveida, 150 x 150 mm	450 g					

Uzglabāšanas temperatūra	no -20 °C līdz +70 °C
Mitrums	Maks. relatīvais mitrums 85 %
Darba temperatūra	no 0 °C līdz 46 °C
Mērīšanas diapazons	no 0 līdz 300 mmHg
Mērījuma izšķirtspēja	2 mmHg
Precizitāte	±3 mmHg

16. Garantija

Visiem Moretti izstrādājumiem tiek nodrošināta 2 (divu) gadu garantija pret materiālu un ražošanas defektiem, skaitot no izstrādājuma pārdošanas datuma, izņemot turpmāk norādītos izņēmumus un ierobežojumus. Šī garantija nav spēkā, ja izstrādājums ir lietots nepareizi, ļaunprātīgi izmantots vai pārveidots vai ja nav ievērota lietošanas instrukcija. Izstrādājuma pareizais paredzētais nolūks ir norādīts lietošanas instrukcijā.

Moretti neatbild par izrietošiem zaudējumiem, miesas bojājumiem vai jebkādu citu kaitējumu, ko izraisījis vai ar ko saistīta iekārtas uzstādīšana un/vai lietošana, ja uzstādīšana un/vai lietošana nav veikta, stingri ievērojot uzstādīšanas, montāžas un lietošanas rokasgrāmatās sniegtos norādījumus.

Moretti garantija neattiecas uz Moretti izstrādājumu bojājumiem vai defektiem, kas radušies šādos apstākļos: dabas katastrofas; neatļauta apkope vai remonts; elektroapgādes traucējumu radīti bojājumi (ja piemērojams); tādu detaļu vai komponentu izmantošana, ko nav piegādājis Moretti; vadlīniju un lietošanas instrukciju neievērošana; neatļautas izmaiņas; transportēšanas bojājumi (izņemot Moretti sākotnējo piegādi); rokasgrāmatā norādītās apkopes neveikšana.

Šī garantija neattiecas uz dilstošām detaļām, ja bojājums radies izstrādājuma normālas lietošanas dēļ.

16.1 Remonts

Garantijas remonts

Ja garantijas laikā Moretti izstrādājumam atklājas materiālu vai ražošanas defekti, Moretti kopā ar klientu izvērtēs, vai uz attiecīgo defektu attiecas garantija. Moretti pēc saviem ieskatiem var nomainīt vai saremontēt izstrādājumu, uz kuru attiecas garantija, norādītā Moretti izplatītāja telpās vai savā uzņēmumā. Ja tiek konstatēts, ka remonts ietilpst garantijas darbības jomā, ar izstrādājuma remontu saistītās darba izmaksas var segt Moretti. Remonts vai nomaīņa neatjauno un nepagarina garantiju.

Izstrādājuma, uz kuru neattiecas garantija, remonts

Izstrādājumu, uz kuru neattiecas garantija, var atgriezt remontam tikai pēc iepriekšējas Moretti klientu apkalpošanas dienesta atļaujas saņemšanas. Ar ārpusgarantijas remontu saistītās darba un piegādes izmaksas pilnībā sedz klients vai izplatītājs. Ārpusgarantijas izstrādājumu remontam tiek nodrošināta 6 (sešu) mēnešu garantija, skaitot no salabotā izstrādājuma saņemšanas dienas.

Izstrādājumi, kuriem nav konstatēti defekti

Klients tiks informēts, ja pēc atgrieztā izstrādājuma pārbaudes un testēšanas Moretti secinās, ka izstrādājumam nav defektu. Izstrādājums tiks atgriezts klientam, un ar atgriešanu saistītās piegādes izmaksas segs klients.

16.2 Rezerves daļas

Oriģinālajām Moretti rezerves daļām ir 6 (sešu) mēnešu garantija, skaitot no rezerves daļas saņemšanas dienas.

16.3 Atbildības ierobežojumi

Izņemot šajā garantijā skaidri noteikto un tiesību aktos atļautajās robežās, Moretti nesniedz nekādus citus tiešus vai netiešus apliecinājumus, garantijas vai nosacījumus, tostarp apliecinājumus, garantijas vai nosacījumus par tirgojamību, piemērotību konkrētam nolūkam, tiesību nepārkāpšanu un neiejaukšanos. Moretti negarantē, ka Moretti izstrādājuma lietošana būs nepārtraukta vai bez kļūdām. Tiesību aktos noteikto iespējamo netiešo garantiju ilgums tiesību aktos atļautajās robežās ir ierobežots līdz garantijas periodam. Dažos štatos vai valstīs nav atļauts ierobežot netiešas garantijas ilgumu vai izslēgt vai ierobežot nejaušus vai netiešus zaudējumus saistībā ar patēriņa precēm. Šādos štatos vai valstīs daži šīs garantijas izņēmumi vai ierobežojumi uz lietotāju var neattiekties. Šī garantija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

