



MA DM330-333-335-342-343-345-346-347-348-350A_F_R-353A_F_R-360-365 01 A_NL_07-2026

SCAN DE QR-CODE
VOOR MEER TALEN



NL ANEROÏDE BLOEDDRUKMETERS
GEBRUIKSAANWIJZING

INHOUDSOPGAVE

1. PRODUCTCODES	pag. 3
2. INLEIDING	pag. 3
3. BEOOGD GEBRUIK	pag. 3
4. ALGEMENE BESCHRIJVING	pag. 3
4.1 Wat is bloeddruk?	pag. 4
4.2 Wat is een normale bloeddruk?	pag. 4
4.3 Werking	pag. 4
5. REFERENTIENORMEN EN -RICHTLIJNEN	pag. 4
6. ALGEMENE MONTAGE VAN DE ONDERDELEN	pag. 4
7. WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK	pag. 4
8. WAARSCHUWINGEN VOOR HET METEN VAN DE BLOEDDRUK	pag. 5
9. VOORWAARDEN VOOR EEN CORRECTE METING	pag. 5
10. GEBRUIKSAANWIJZING	pag. 5
10.1 De manchet kiezen	pag. 6
11. ONDERHOUD EN VERZORGING	pag. 7
12. REINIGING	pag. 7
13. INSTRUCTIES VOOR AFVALVERWIJDERING	pag. 8
13.1 Algemene instructies voor afvalverwijdering	pag. 8
14. RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES p.....	ag. 8
15. TECHNISCHE SPECIFICATIES	pag. 8
16. GARANTIE	pag. 9
16.1 Reparaties	pag. 9
16.2 Reserveonderdelen	pag. 9
16.3 Aansprakelijkheidsbeperkingen	pag. 10

CE Medisch hulpmiddel van klasse I met een meetfunctie.
 Italiaans wetsbesluit 24/02/97 nr. 46 ter uitvoering
 van Richtlijn 93/42/EEG, zoals gewijzigd.

1. Productcodes

DM330	Standaard aneroïde bloeddrukmeter
DM333	Standaard aneroïde bloeddrukmeter met stethoscoop
DM335	Aneroïde bloeddrukmeter met manometer op de manchet
DM342	Handmodel aneroïde bloeddrukmeter - complete set met drie manchetten
DM343	Handmodel aneroïde bloeddrukmeter met twee slangen
DM345	Handmodel aneroïde bloeddrukmeter met grote behuizing
DM346	Handmodel aneroïde bloeddrukmeter met grote behuizing en stethoscoop
DM347	Handmodel aneroïde bloeddrukmeter met schokbestendige behuizing
DM348	Handmodel aneroïde bloeddrukmeter voor links- en rechtshandig gebruik
DM350A	Aneroïde bloeddrukmeter - kleur blauw
DM350F	Aneroïde bloeddrukmeter - kleur bosgroen
DM350R	Aneroïde bloeddrukmeter - kleur rood
DM353A	Aneroïde bloeddrukmeter met stethoscoop - kleur blauw
DM353F	Aneroïde bloeddrukmeter met stethoscoop - kleur bosgroen
DM353R	Aneroïde bloeddrukmeter met stethoscoop - kleur rood
DM360	Aneroïde bloeddrukmeter voor tafel- of wandmontage
DM365	Aneroïde bloeddrukmeter op standaard

2. Inleiding

Dank u dat u hebt gekozen voor een aneroïde bloeddrukmeter uit de **LOGIKO-lijn** van Moretti. De **LOGIKO-bloeddrukmeters** van Moretti zijn ontworpen en vervaardigd voor praktisch, correct en veilig gebruik. Deze handleiding bevat aanwijzingen voor het correcte gebruik van het door u gekozen hulpmiddel en belangrijke adviezen voor uw veiligheid. Het wordt aanbevolen deze handleiding zorgvuldig door te lezen voordat u de aneroïde bloeddrukmeter gebruikt. Neem bij twijfel contact op met de dealer. De dealer kan u helpen en deskundig adviseren.

3. Beoogd gebruik

De aneroïde bloeddrukmeters uit de **LOGIKO-lijn** van Moretti zijn hulpmiddelen voor het meten van de bloeddruk volgens de auscultatoire Riva-Rocci/Korotkoff-methode.

LET OP!



- Het is verboden dit hulpmiddel te gebruiken voor andere doeleinden dan in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven.
- Moretti S.p.A. wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van het hulpmiddel of uit gebruik anders dan aangegeven in deze handleiding.
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan het hulpmiddel en deze handleiding om de eigenschappen ervan te verbeteren.

4. Algemene beschrijving

Aneroïde bloeddrukmeters zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen:

- **HANDMODEL ANEROÏDE BLOEDDRUKMETER**
- **ANEROÏDE BLOEDDRUKMETER MET APARTE POMPBAL**

Alle modellen zijn verkrijgbaar met een geïntegreerde stethoscoop. De handmodellen kunnen met één hand worden gebruikt, omdat de pompbal en de manometer één geheel vormen. De uitvoering met aparte pompbal is de klassieke aneroïde bloeddrukmeter; Dit systeem beperkt de omvang van het hulpmiddel tot een minimum, zonder afbreuk te doen aan de technische eigenschappen en betrouwbaarheid.

4.1 Wat is bloeddruk?

Bloeddruk is de druk die het bloed uitoefent op de wanden van de bloedvaten. De hoogste druk in de slagaders tijdens de hartcyclus wordt gedefinieerd als systolische druk, terwijl de laagste druk wordt gedefinieerd als diastolische druk.

4.2 Wat is een normale bloeddruk?

Het is belangrijk te weten dat de bloeddruk sterk kan schommelen. De bloeddruk is afhankelijk van vele factoren. Over het algemeen is de bloeddruk lager in de zomer en hoger in de winter. De bloeddruk kan variëren met de atmosferische druk en wordt sterk beïnvloed door bijvoorbeeld lichamelijke inspanning, emotionele prikkeling, stress, maaltijden, geneesmiddelen, alcohol, roken, leeftijd enz. Het wordt aanbevolen de dagelijkse metingen te noteren, zodat u een arts kunt raadplegen om een voor u normale bloeddrukwaarde vast te stellen.

NB: De bloeddruk varieert met de leeftijd, dus u moet uw arts raadplegen om te bepalen wat een normale bloeddruk voor u is. U mag in geen geval de dosering van medicijnen die uw arts u heeft voorgeschreven, wijzigen!

4.3 Werking

Bloeddrukmeters maken gebruik van het Riva-Rocci/Korotkoff-auscultatiesysteem. De voor de meting benodigde luchtdruk in de manchet wordt met een pompbal opgebouwd. Met het ontluchttingsventiel kan de lucht gecontroleerd en nauwkeurig uit de manchet worden afgevoerd, zodat de meting kan worden uitgevoerd. Elke manometer heeft een afleesschaal met een meetbereik van 0 tot 300 mmHg (mmHg = millimeter kwik), een schaalverdeling van 2 mmHg en grotere markeringen om de 10 mmHg voor een eenvoudige aflezing. De meetnauwkeurigheid over het gehele bereik is ± 3 mmHg. Elke bloeddrukmeter wordt gekalibreerd en aan een eindcontrole onderworpen.

5. Referentienormen en -richtlijnen

De LOGIKO-bloeddrukmeters van Moretti zijn vervaardigd overeenkomstig de geldende norm EN 81060-1, Niet-invasieve bloeddrukmeters - Deel 1: Eisen en beproevingsmethoden voor niet-geautomatiseerde meettypen.

6. Algemene montage van onderdelen

ANEROÏDE BLOEDDRUKMETER MET 2 SLANGEN - Sluit één slang van de luchtblaas aan op de manometer en de andere slang op de pompbal met drukregelventiel.

HANDMODEL ANEROÏDE BLOEDDRUKMETER MET 1 SLANG - Sluit de slang van de luchtblaas aan op de betreffende aansluiting van het handmodel.

HANDMODEL ANEROÏDE BLOEDDRUKMETER MET 2 SLANGEN - Sluit één slang van de luchtblaas aan op een van de twee aansluitingen van het handmodel. Sluit de andere slang aan op de resterende aansluiting van de bloeddrukmeter.

7. Waarschuwingen voor het gebruik

- Raadpleeg deze handleiding zorgvuldig voor correct gebruik van het hulpmiddel;
- Volg altijd de instructies voor het product dat u hebt gekocht;
- Houd het hulpmiddel altijd buiten het bereik van kinderen;
- Verhoog de druk nooit boven 300 mmHg.

8. Waarschuwingen bij het meten van de bloeddruk

- Gebruik normaal gesproken altijd uw linkerarm;
- Vermijd elke activiteit vóór de meting;
- Eet, drink of beweeg niet tijdens de meetfase;
- Druk niet met uw vingers op de kop van de stethoscoop. Dit kan uw bloeddrukmeting beïnvloeden;
- Meet uw bloeddruk altijd op dezelfde tijdstippen;
- Noteer altijd de datum en tijd van de meting.

9. Voorwaarden voor een correcte meting

Tijdens de meting moet de patiënt comfortabel zitten, met de rug goed ondersteund, in een rustige en schone omgeving. De benen mogen niet gekruist zijn. De elleboog van de patiënt moet op de tafel worden geplaatst, zodat het hulpmiddel zich op harthoogte bevindt. Het midden van de manchet moet op de linker bovenarm worden geplaatst, ter hoogte van het rechteratrium. De arm moet ontbloot zijn. Als de mouw van het kledingstuk omhooggetrokken wordt, mag deze niet strak zitten. Tijdens de meting moet de patiënt de handpalm naar boven richten, ontspannen blijven, stilzitten en niet spreken. Het wordt aanbevolen vóór de eerste meting 5 minuten ontspannen in deze houding te blijven zitten.

Aanwijzingen voor het gebruik van Korotkoff-fase K5 bij auscultatie van volwassenen:

K5 is het punt waarop de Korotkoff-toon niet langer hoorbaar is.

Aanwijzingen voor het gebruik van Korotkoff-fase K4 bij auscultatie van kinderen van 3 tot 12 jaar:



De K4-toon verandert van een heldere puls naar een gedempt geluid.

Aanwijzingen voor het gebruik van Korotkoff-fase K5 bij auscultatie van zwangere vrouwen:

Als de K5-toon niet meer hoorbaar is wanneer de manchet leeg is, moet de K4-toon worden gebruikt.

10. Gebruiksaanwijzing

De gebruiker moet zich in een warme ruimte bevinden. Maak de linkerarm vrij van kleding. Ga aan een tafel of bureau zitten waar u uw arm gemakkelijk kunt uitstrekken. Plaats uw elleboog op de tafel, ongeveer op harthoogte. Houd uw handpalm naar boven gericht. Wikkel de manchet om uw blote arm, zodat het midden van de manchet zich boven de armslagader bevindt. De onderkant van de manchet moet zich ongeveer 2-3 cm boven de plooi van uw elleboog bevinden. Breng de manchet zo aan dat deze goed om uw arm aansluit. U moet nog steeds één vinger tussen de manchet en uw arm kunnen steken.

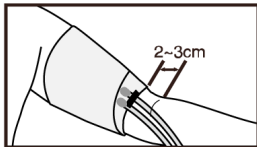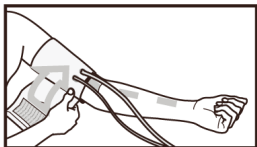

NB: Trek de manchet niet te strak aan; anders wordt de bloedcirculatie aanzienlijk beperkt. Plaats de kop van de stethoscoop (OPTIONEEL) onder het midden van de manchet, op ongeveer 3-4 cm afstand van de elleboogplooi.


NB: De stethoscoop mag niet te stevig tegen de manchet worden gedrukt, anders wordt de gemeten diastolische druk vertekend.

Breng de oorbeugels van de stethoscoop aan om de harttonen te beluisteren. Blaas nu de luchtblaas in de manchet op met de pompbal van het hulpmiddel. Controleer eerst of het ontluuchtingsventiel gesloten is. Pomp vervolgens lucht in het circuit totdat de druk ongeveer 30 mmHg boven de normale systolische druk ligt (als u voor het eerst uw bloeddruk meet, pomp dan op tot ongeveer 180 mmHg). Blijf tijdens de bloeddrukmeting volkomen stil. Begin de luchtblaas langzaam leeg te laten lopen door het ontluuchtingsventiel te verstellen, zodat de druk met ongeveer 2-3 mmHg per seconde daalt. Luister naar de stethoscoop en kijk tegelijkertijd naar de manometer. Wanneer u ten minste twee opeenvolgende hartslagen duidelijk waarneemt, geeft de manometer de maximale (systolische) druk aan; wanneer deze slagen niet meer hoorbaar zijn, geeft de manometer de minimale (diastolische) druk aan. Nadat u ook de diastolische druk hebt bepaald, opent u het ontluuchtingsventiel volledig om de resterende lucht snel uit de luchtblaas te laten ontsnappen. Verwijder vervolgens de stethoscoop en de manchet. Houd de manchet niet te lang opgeblazen.

10.1 De manchet kiezen

BELANGRIJK: DE MANCHETMAAT MOET CORRECT ZIJN

De bovenarmomtrek van de patiënt is bepalend voor de keuze van de juiste manchetmaat. Het hulpmiddel wordt standaard geleverd met een manchet voor volwassenen. Deze manchet is geschikt voor een bovenarmomtrek van 26 tot 36 cm. Voor verschillende maten moeten manchetten worden gebruikt volgens de tabel in deze handleiding.

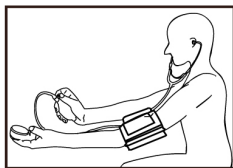

Model	Beschrijving	Zonder lucht- blaas	Met luchtblaas en 1 slang	Met luchtblaas en 2 slangen
Klittenbandsluiting, zonder metalen ring	DIJMANCHET Manchetafmetingen L: 80x21 cm Omtrek van het ledemaat Ø 42-57 cm	DR126	DR1438	DR125
	BARIATRISCH Manchetafmetingen L: 60x18 cm Omtrek van het ledemaat Ø 32-47 cm	DR123	DR1435	DR1425
	VOLWASSENEN Manchetafmetingen L: 51x14 cm Omtrek van het ledemaat Ø 26-36 cm	DR120B	DR1433	DR1423
NL Haaksluiting Zonder metalen ring	VOLWASSENEN Manchetafmetingen L: 50x14 cm Omtrek van het ledemaat Ø 26-38 cm	DR124	DR1436	DR1426
Klittenbandsluiting Zonder metalen ring	JONGEREN Manchetafmetingen L: 48x10 cm Omtrek van het ledemaat Ø 24-32 cm	DR119	DR1432	DR1422
	KINDEREN Manchetafmetingen L: 38x6,5 cm Omtrek van het ledemaat Ø 13-26 cm	DR118	DR1431	DR1421
	PASGEBORENEN Manchetafmetingen L: 22x4,5 cm Omtrek van het ledemaat Ø 7-13 cm	DR117	DR1430	DR1420

Model	Beschrijving	Zonder lucht- blaas	Met luchtblaas en 1 slang	Met luchtblaas en 2 slangen
Klittenbandsluiting, met metalen ring	BARIATRISCH	-	DR314	-
	VOLWASSENEN Manchetafmetingen L: 48,3x14 cm Omtrek van het ledemaat Ø 26-36 cm	DR121B	DR1434	DR1424
Klittenbandsluiting, met metalen ring en stethoscoop	VOLWASSENEN Manchetafmetingen L: 48,3x14 cm Omtrek van het ledemaat Ø 26-36 cm	DR122	DR1437	DR1427
Klittenbandsluiting, met grijze metalen ring	VOLWASSENEN	-	DR1439	DR1429

Het volwassenenmodel met D-ring (een stalen ring waarmee de manchet dubbel kan worden gesloten) is bij uitstek geschikt voor zelfmeting. Alle luchtblazen zijn van PVC.

11. Onderhoud en verzorging

De hulpmiddelen uit de **LOGIKO**-lijn van Moretti worden vóór het in de handel brengen zorgvuldig gecontroleerd en van de CE-markering voorzien. Elke bloeddrukmeter wordt gekalibreerd en onderworpen aan een volledige eindinspectie.

Controleer vóór elk gebruik, in rusttoestand, of de wijzer op de wijzerplaat van de aneroïde bloeddrukmeter zich binnen de toegestane tolerantie van ± 3 mmHg bevindt (herkenbaar aan een dikkere marking op de schaalverdeling iets boven en onder nul). Bloeddrukmeters die buiten de tolerantie van ± 3 mmHg vallen, moeten opnieuw worden gekalibreerd. Neem contact op met uw dealer voor gekwalificeerde technische ondersteuning. Bij reparaties mogen uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires worden gebruikt.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

Let in het bijzonder op de volgende punten:

- De druk mag absoluut niet hoger zijn dan 300 mmHg;
- Laat het hulpmiddel niet achter in vochtige omgevingen;
- Laat het hulpmiddel niet vallen (laat de correcte werking ervan na een val altijd opnieuw controleren door een erkend laboratorium);
- Stel het hulpmiddel niet bloot aan direct zonlicht.
- Houd het hulpmiddel uit de buurt van warmtebronnen;
- Breng de druk nooit boven 300 mmHg;
- De meettijd mag niet langer dan 2 minuten zijn;
- Herhaal de meting niet voordat er minimaal 5 minuten zijn verstreken;
- Bescherm het instrument tegen sterke schokken en stoten;
- Voorkom dat rubberen onderdelen beschadigd raken door scherpe en puntige voorwerpen;
- Bewaren bij temperaturen tussen 10 °C en 40 °C met een maximale relatieve luchtvochtigheid van 85%.

12. Reiniging

MANOMETER - Gebruik uitsluitend een zachte, droge doek.

POMPBAL MET VENTIEL - Gebruik uitsluitend een zachte, vochtige doek en droog vervolgens grondig af.

MANCHET - Voor een correcte reiniging wordt aanbevolen de luchtblaas uit de manchet te verwijderen en de manchet vervolgens met lauw water en neutrale zeep te wassen.

LUCHTBLAAS - Reinig met lauw water en neutrale zeep en voorkom dat er water in de luchtblaas komt. Als er een beetje water in de luchtblaas is gekomen, laat deze vóór gebruik volledig drogen. Houd de slangen naar beneden zodat het water eruit kan lopen.

STETHOSCOOP - Gebruik uitsluitend een zachte, vochtige doek en droog deze vervolgens grondig af. Reinig de overige onderdelen met lauw water en neutrale zeep en droog ze grondig af.

13. Instructies voor afvalverwijdering

13.1 - Algemene instructies voor afvalverwijdering



Voer het hulpmiddel nooit af via de normale inzameling van huishoudelijk afval. Het wordt aanbevolen het hulpmiddel naar een gemeentelijk inzamelpunt te brengen, zodat de gebruikte materialen kunnen worden gerecycled.

14. Reserveonderdelen/accessoires

Raadpleeg voor reserveonderdelen en accessoires de algemene catalogus van MORETTI.

15. Technische specificaties

Model	Manometer	Wijzerplaat	Gewicht	Schaalverdeling	Manchet	Pompbal	Behuizing	Ventiel	
DM330	Ø 50 mm	Ø 45 mm	363 g	Schaalverdeling met intervallen van 2 mmHg (kleine streepjes), grote streepjes (om de 20 mmHg genummerd). Schaalverdeling met intervallen van 2 mmHg (kleine streepjes), grote streepjes (om de 20 mmHg genummerd).	2 slangen	PVC	Lichtmetaallegering, blauw gelakt	Handmatig schroefventiel	
DM333	Ø 50 mm	Ø 45 mm	478 g		1 slang		Lichtmetaallegering, blauw gelakt, met blauwe rubberen beschermring		
DM335	Ø 50 mm	Ø 45 mm	320 g				Verchroomde lichtmetaallegering		
DM342	Ø 60 mm	Ø 57 mm	986 g				1 slang	In verchroomd metaal	Drukknopventiel
DM343	Ø 67 mm	Ø 57 mm	606 g		2 slangen				
DM345	Ø 65 mm	Ø 60 mm	430 g		1 slang				
DM346	Ø 65 mm	Ø 60 mm	446 g		2 slangen		Verchroomde lichtmetaallegering		
DM347	Ø 65 mm	Ø 57 mm	350 g		1 slang				
DM348	Ø 67 mm	Ø 57 mm	426 g						
DM350A	Ø 50 mm	Ø 50 mm	483 g				2 slangen		Behuizing van zwart gelakte lichtmetaallegering
DM350F									
DM350R									
DM353A	Ø 50 mm	Ø 50 mm	603 g		2 slangen				
DM353F									
DM353R									
DM360	Vierkant 145x145 mm	Vierkant 150x150 mm	725 g	1 slang		Van lichtgewicht gekleurde kunststof			
DM365	Vierkant 145x145 mm	Vierkant 150x150 mm	450 g						

Opslagtemperatuur	van -20 °C tot +70 °C
Vochtigheid	Max. 85% relatieve luchtvochtigheid
Bedrijfstemperatuur	van 0 °C tot 46 °C
Meetbereik	van 0 tot 300 mmHg
Meetresolutie	2 mmHg
Nauwkeurigheid	± 3 mmHg

16. Garantie

Op alle Moretti-producten geldt een garantie van 2 (twee) jaar tegen materiaal- of fabricagefouten, gerekend vanaf de verkoopdatum van het product, met uitzondering van de hieronder vermelde uitsluitingen en beperkingen. Deze garantie vervalt in geval van verkeerd gebruik, misbruik of wijziging van het product en bij het niet naleven van de gebruiksaanwijzing. Het juiste beoogde gebruik van het product staat vermeld in de gebruiksaanwijzing.

Moretti is niet aansprakelijk voor enige schade, persoonlijk letsel of andere gevolgen die voortvloeien uit of verband houden met de installatie en/of het gebruik van de apparatuur indien de instructies in de installatie-, montage- en gebruiksaanwijzingen niet nauwgezet worden opgevolgd.

Moretti geeft geen garantie op Moretti-producten tegen schade of defecten in de volgende gevallen: Natuurrampen, niet-geautoriseerd onderhoud of niet-geautoriseerde reparaties, schade als gevolg van problemen met de stroomvoorziening (indien van toepassing), gebruik van onderdelen of componenten die niet door Moretti zijn geleverd, het niet naleven van de richtlijnen en gebruiksaanwijzingen, niet-geautoriseerde aanpassingen, transportschade (anders dan de oorspronkelijke verzending door Moretti) of het niet uitvoeren van onderhoud zoals aangegeven in de handleiding.

Slijtageonderdelen vallen niet onder deze garantie indien de schade is ontstaan door normaal gebruik van het product.

16.1 Reparaties

Garantiereparatie

Indien een Moretti-product tijdens de garantieperiode materiaal- of fabricagefouten vertoont, zal Moretti in overleg met de klant beoordelen of het productdefect onder de garantie valt. Moretti kan, geheel naar eigen goeddunken, het artikel onder garantie vervangen of repareren, bij een aangewezen Moretti-dealer of in eigen werkplaats. De arbeidskosten voor de reparatie van het product kunnen door Moretti worden gedragen als de reparatie onder de garantie valt. Een reparatie of vervanging verlengt de garantie niet.

Reparatie van een product dat niet onder de garantie valt

Indien een product dat niet onder de garantie valt, kan alleen voor reparatie worden teruggestuurd na voorafgaande toestemming van de klantenservice van Moretti. De arbeids- en verzendkosten in verband met een reparatie buiten de garantie zijn volledig voor rekening van de klant of dealer. Reparaties aan producten die niet onder de garantie vallen, zijn gegarandeerd gedurende 6 (zes) maanden, te rekenen vanaf de dag dat u het gerepareerde product ontvangt.

Niet-defecte producten

De klant wordt op de hoogte gesteld als Moretti na onderzoek en testen van een geretourneerd product concludeert dat het product niet defect is. Het product wordt teruggestuurd naar de klant en de kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant.

16.2 Reserveonderdelen

Originele Moretti-onderdelen hebben een garantie van 6 (zes) maanden vanaf de dag dat u het onderdeel ontvangt.

16.3 Aansprakelijkheidsbeperkingen

Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in deze garantie is bepaald en voor zover wettelijk toegestaan, geeft Moretti geen andere verklaringen, garanties of voorwaarden, expliciet noch impliciet, met inbegrip van verklaringen, garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk en niet-verstoring. Moretti garandeert niet dat het gebruik van het Moretti-product ononderbroken of foutloos zal zijn. De duur van eventuele impliciete garanties die wettelijk van toepassing kunnen zijn, is beperkt tot de duur van de garantieperiode, voor zover wettelijk toegestaan. Sommige staten of landen staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie of de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade in verband met consumentenproducten. In dergelijke staten of landen zijn sommige uitsluitingen of beperkingen van deze garantie mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

