

moretti®

MA RH780-RH830 01 A_DK_07-2026

DA **Brusestole**
BRUGSANVISNING


SCAN QR-KODEN
FOR FLERE SPROG



INDHOLD

1. PRODUKTKODER.....	SIDE.3
2. INDLEDNING.....	SIDE.3
3. TILSIGTET ANVENDELSE	SIDE.3
4. EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING	SIDE.3
5. GENERELLE ADVARSLER	SIDE.4
6. ANVENDTE SYMBOLER.....	SIDE.4
7. GENEREL BESKRIVELSE.....	SIDE.4
7.1 RH780	side. 4
7.2 RH830	side. 4
8. MONTERING.....	SIDE.4
8.1 RH780	side. 4
9. FØR HVER BRUG	SIDE.5
10. ADVARSLER VED BRUG	SIDE.5
11. ANVENDELSE	SIDE.5
11.1 RH780	side. 5
11.2 RH830	side. 5
12. VEDLIGEHOLDELSE	SIDE.6
13. RENGØRING OG DESINFEKTION	SIDE.6
13.1 Rengøring	side. 6
13.2 Desinfektion.....	side. 6
14. BORTSKAFFELSE	SIDE.6
15. TEKNISKE SPECIFIKATIONER.....	SIDE.6
16. GARANTI	SIDE.7
17. REPARATIONER	SIDE.7
17.1 Reparation under garantien.....	side. 7
17.2 Reparation af et produkt, der ikke er dækket af garantien.....	side. 7
17.3 Ikke-defekte produkter	side. 7
18. RESERVEDELE.....	SIDE.7
19. ANSVARSFRASKRIVELSE.....	SIDE.8

DA

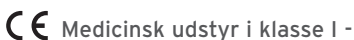

Medicinsk udstyr i klasse I -
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/745 af 5. april
2017 om medicinsk udstyr

1. PRODUKTKODER

RH780 4-i-1 toilet- og badestol

RH830 Brusestol med ryglæn

2. INDLEDNING

Tak, fordi du har valgt et bade-/brusesæde fra MOPEDIA by Moretti-serien. Moretti bade-/brusesæder er designet og fremstillet til at opfylde alle dine behov for praktisk, korrekt og sikker brug. Denne brugsanvisning indeholder anvisninger til korrekt brug af det valgte udstyr samt vigtige sikkerhedsoplysninger. Læs hele denne brugsanvisning omhyggeligt, før du tager sædet i brug. Hvis du er i tvivl, så kontakt din forhandler, som vil kunne hjælpe og rådgive dig korrekt.

DA

Bemærk: Kontrollér, at ingen dele af produktet er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af skader må du ikke bruge produktet og skal kontakte din forhandler for at få yderligere instruktioner.

ADVARSEL!



- Det er forbudt at bruge følgende enhed til andre formål end dem, der er defineret i denne brugsanvisning.
- Moretti S.p.A. fraskriver sig ethvert ansvar for skader, der skyldes forkert brug af udstyret eller brug i strid med denne brugsanvisning.
- Fabrikanten forbeholder sig ret til uden varsel at ændre udstyret og denne brugsanvisning med henblik på at forbedre udstyrets egenskaber.

3. TILSIGTET ANVENDELSE

MOPEDIA-bade- og brusehjælpemidlerne fra Moretti er udviklet til at gøre det lettere for personer med handicap eller nedsat mobilitet at sidde under personlig hygiejne på badeværelset.

4. EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

MORETTI SpA erklærer på eget ansvar, at de produkter, der fremstilles og markedsføres af MORETTI SpA, og som indgår i serierne TOILETSTOLE OG TOILETSTØTTER (RH780) - BRUDESTOLE (RH830) overholder de gældende bestemmelser i forordning 2017/745 om MEDICINSK Udstyr af 5. april 2017.

Til dette formål garanterer og erklærer MORETTI SpA under eget ansvar følgende:

1. Det pågældende udstyr opfylder de generelle krav til sikkerhed og ydeevne i bilag I til forordning (EU) 2017/745 som krævet i bilag IV til samme forordning.
2. Det pågældende udstyr er IKKE MÅLEUDSTYR.
3. Det pågældende udstyr er IKKE BEREGNET TIL KLINISKE AFPRØVNINGER.
4. Det pågældende udstyr markedsføres i IKKE-STERIL emballage.
5. Det pågældende udstyr tilhører klasse I i henhold til bilag VIII til ovennævnte forordning.
6. MORETTI SpA opbevarer den tekniske dokumentation og stiller den til rådighed for de kompetente myndigheder i mindst 10 år fra fremstillingsdatoen for det sidste parti. Dokumentationen bekræfter overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745.

Billederne er kun til illustrationsformål

BEMÆRK: De fuldstændige produktkoder, fabrikantens registreringsnummer (SRN), den grundlæggende UDI-DI og eventuelle henvisninger til anvendte standarder fremgår af den EU-overensstemmelseserklæring, som MORETTI SPA udsteder og gør tilgængelig via sine kanaler.

5. GENERELLE ADVARSLER

- Læs denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre korrekt brug af udstyret.
- Hold det emballerede produkt væk fra enhver varmekilde, da emballagen er lavet af pap.
- Enhedens levetid bestemmes af sliddet på de dele, der ikke kan repareres og/eller udskiftes.
- Vær altid meget opmærksom på tilstedeværelsen af bevægelige dele, der kan forårsage fastklemning af lemmer og personskade
- Vær altid opmærksom på, om der er børn til stede.
- Brugeren og/eller patienten skal indberette enhver alvorlig hændelse i forbindelse med udstyret til fabrikanten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

6. ANVENDTE SYMBOLER

	Produktkode		Batchkode
	Unik udstyrsidentifikation		Medicinsk udstyr
	Læs brugsanvisningen		CE-mærkning
	Bortskaffelse		Fabrikant

7. GENEREL BESKRIVELSE

7.1 RH780

Stålstel med sæde og ryglæn i HDPE. Vipbare armlæn med PE-beklædning på støttefladerne og skridsikre gummifødder. Kan justeres i højden. Kan anvendes til 4 formål: stabiliserende toiletforhøjer, toiletstøtte, toiletstol og badestol.

7.2 RH830

Brusestol med ryglæn og forstærket aluminiumsstel med krydsafstivning. Sæde og ryglæn i HDPE med skridsikre gummifødder. Højdejusterbar for større tilpasningsevne.

8. MONTERING

8.1 RH780

Produktet leveres allerede samlet. De eneste elementer, der skal samles, er benene. For at montere benene skal du trykke på låseknappen på hvert ben på rammen og sætte benene i. Fastgør positionen ved at lade knappen gå i indgreb i et af hullerne.

8.2 RH830

Produktets sæde og ben leveres allerede samlet. Sådan monteres ryglænet:

- Vend sædet om

- Tryk på låseknapperne på ryglænsstellet;
- Før ryglænsrørene ind i føringerne under sædet, indtil låseknapperne går i indgreb i hullerne.

9. FØR HVER BRUG

- Kontrollér altid delene for slitage for at sikre, at udstyret kan anvendes sikkert uden risiko for person- eller tingsskade.
- Kontrollér, at enheden er samlet korrekt.

10. ADVARSLER VED BRUG

Fabrikanten og distributøren fraskriver sig ethvert ansvar for følger af forkert brug af produktet.

- Hjælp altid patienter med gangbesvær med at sætte sig på sædet.
- Må ikke bruges til patienter, der overstiger den maksimale vægt, der er angivet på produktetiketten på hjælpemidlets stel.
- Undgå pludselige bevægelser under positionering.
- Vær opmærksom på våde, fugtige eller glatte gulve, da de kan gøre det vanskeligt for patienten at sætte sig sikkert.
- Opbevar ikke produktet udendørs. Kontrollér regelmæssigt produktets stabilitet og den korrekte fastgørelse af skruerne samt gummibeskytternes tilstand.
- Hvis du er i tvivl om brug, justering eller vedligeholdelse af produktet, skal du kontakte din forhandler.

DA



ADVARSEL!

Overskrid under ingen omstændigheder den maksimalt tilladte belastning!

11. ANVENDELSE

11.1 RH780

- Sæt dig ned, og fordel din vægt over hele sædet. Belast ikke kun den ene side, når du sætter dig;
- Støt dig altid til begge armlæn for at rejse dig og holde balancen.
- Hvis stolen bruges af personer med betydelige bevægelsesvanskeligheder, skal de altid hjælpes med at sætte sig og rejse sig fra stolen.

HØJDEJUSTERING

For at justere højden:

- Tryk på justeringsknappen, og flyt stangen til den ønskede højde
- Fastgør positionen ved at lade knappen gå i indgreb i et af hullerne.

11.2 RH830

- Sæt dig ned, og fordel din vægt over hele sædet. Belast ikke kun den ene side, når du sætter dig;
- Hvis stolen bruges af personer med betydelige bevægelsesvanskeligheder, skal de altid hjælpes med at sætte sig og rejse sig fra stolen.

HØJDEJUSTERING

For at justere sædets højde:

- Fjern clipsen på benet;
- Flyt benet op eller ned til den ønskede højde;
- Sæt clipsen i hullet for at fastgøre benet.

12. VEDLIGEHOLDELSE

ONDA HD-udstyret fra Moretti kontrolleres grundigt og CE-mærkes, før det markedsføres. Af hensyn til patientens og lægens sikkerhed anbefales det at få produktets egnethed kontrolleret af fabrikanten eller et autoriseret laboratorium mindst hvert 2. år.

Periodisk inspektion betyder en undersøgelse af følgende dele:

- Produktets bærende stel og forbindelsesdele;
- Montering og betjening af hjul/ben;
- Alle svejsepunkter
- Kontrollér eventuelt slid på gummifødderne.

I tilfælde af reparationer må der kun anvendes originale reservedele og tilbehør.

DA

13. RENGØRING OG DESINFEKTION

13.1 Rengøring

Rengør produktet udelukkende med en klud fugtet med vand, og tør det med en ren, tør klud. Alternativt kan der anvendes lunkent vand og neutral sæbe.



ADVARSEL!

Brug ikke slibende midler, syrer, alkohol, klorholdige rengøringsmidler, desinfektionsmidler eller acetone, da disse stoffer kan beskadige plastdelene og få metaloverfladerne til at ruste.

Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af brug af materialer, der kan forringe produktets overflade, eller af ætsende kemikalier, der anvendes under rengøring.

13.2 Desinfektion

Desinficer om nødvendigt produktet med et mildt, desinficerende rengøringsmiddel.

Brug en fugtig svamp og mild sæbe til sædet og ryglænet. Toilettet skal rengøres og desinficeres regelmæssigt med et normalt desinfektionsmiddel til badeværelser (til RH780).

14. BORTSKAFFELSE



Udstyret må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Udstyret skal i stedet afleveres på en kommunal genbrugsstation, så de anvendte materialer kan genanvendes korrekt.

15. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

RH780

*Dimensioner: L: 71 cm P: 51,5 cm H: 74,5-85,5 cm

Sæde: 59 x 47 x 5,5 cm

Sædehøjde: 49-60 cm

Armlænets højde: 67-78 cm



Maksimal belastning: 290 kg

RH830

*Dimensioner: L: 46 cm P: 40,5 cm H: 76-87 cm

Sæde: 51 x 31 x 8,1 cm

Sædehøjde: 41-52 cm



Maksimal belastning: 227 kg

16. GARANTI

Alle Moretti-produkter er garanteret mod materiale- og fabrikationsfejl i en periode på 2 (to) år fra produktets salgsdato, med forbehold for eventuelle undtagelser og begrænsninger, der er angivet nedenfor. Denne garanti er ikke gyldig i tilfælde af forkert brug, misbrug eller ændring af produktet og ved manglende overholdelse af brugsanvisningen. Produktets korrekte tilsigtede anvendelse er angivet i brugsanvisningen.

Moretti er ikke ansvarlig for eventuelle skader, personskader eller andet, der er forårsaget af eller relateret til installation og/eller brug af udstyret, der ikke er i nøje overensstemmelse med instruktionerne i installations-, monterings- og brugsanvisningerne.

Moretti yder ikke garanti for Moretti-produkter ved skader eller fejl under følgende omstændigheder: naturkatastrofer, uautoriseret vedligeholdelse eller reparation, skader som følge af problemer med strømforsyningen (hvis relevant), brug af dele eller komponenter, der ikke er leveret af Moretti, manglende overholdelse af retningslinjer og brugsanvisning, uautoriserede ændringer, transportskader (bortset fra Morettis oprindelige forsendelse) eller manglende udførelse af den vedligeholdelse, der er angivet i brugsanvisningen.

Sliddele er ikke dækket af denne garanti, hvis skaden skyldes normal brug af produktet.

17. REPARATIONER

17.1 Reparation under garantien

Hvis et Moretti-produkt har materiale- eller produktionsfejl i garantiperioden, vil Moretti sammen med kunden vurdere, om produktfejlen er dækket af garantien. Moretti kan efter eget skøn udskifte eller reparere det garantidækkede produkt hos en af Moretti udpeget forhandler eller på Morettis eget værksted. Arbejdsomkostningerne i forbindelse med reparationen kan dækkes af Moretti, hvis det fastslås, at reparationen er omfattet af garantien. Reparation eller udskiftning fornyer eller forlænger ikke garantien.

17.2 Reparation af et produkt, der ikke er dækket af garantien

Et produkt, der ikke er dækket af garantien, kan kun returneres til reparation efter forudgående tilladelse fra Morettis kundeservice. Arbejds- og forsendelsesomkostninger i forbindelse med en reparation, der ikke er dækket af garantien, skal betales fuldt ud af kunden eller forhandleren. Reparationer på produkter, der ikke er dækket af garantien, er garanteret i 6 (seks) måneder fra den dag, hvor det reparerede produkt modtages.

17.3 Ikke-defekte produkter

Kunden vil blive underrettet, hvis Moretti efter at have undersøgt og testet et returneret produkt konkluderer, at produktet ikke er defekt. Produktet vil blive returneret til kunden, og kunden vil være ansvarlig for returforsendelsesomkostningerne.

18. RESERVEDELE

For reservedele og tilbehør henvises udelukkende til Morettis generelle katalog. Originale Moretti-reservedele er garanteret i 6 (seks) måneder fra den dag, hvor reservedelen modtages.

DA

19. ANSVARSFRASKRIVELSE

Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af denne garanti, og i det omfang lovgivningen tillader det, afgiver Moretti ingen andre erklæringer og yder ingen andre garantier eller vilkår, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder om salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, frihed for tredjemandsrettigheder eller uforstyrret brug. Moretti garanterer ikke, at brugen af Moretti-produktet vil være uafbrudt eller fejlfri. I det omfang lovgivningen tillader det, er varigheden af eventuelle stiltiende garantier begrænset til garantiperioden. Nogle stater eller lande tillader ikke begrænsninger af varigheden af en stiltiende garanti eller udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskader i forbindelse med forbrugerprodukter. I sådanne stater eller lande gælder visse undtagelser eller begrænsninger i denne garanti muligvis ikke for dig. Denne garanti kan ændres uden varsel.

DA



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20022 Cavriana (Arezzo) Tlf. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

Billederne er kun til illustrationsformål

[illegible]

Billederne er kun til illustrationsformål

NOTER

DA



Moretti S.p.A.

Via Bruxelles, 3
52022 Cavriglia (AR), Italy

info@morettispa.com
www.morettispa.com