

moretti®

MA RP540_RP545x_RP551 01 A_EL_07-2026

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ



EL Τροχήλατοι περιπατητήρες αλουμινίου
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΚΩΔΙΚΟΙ	ΣΕΛ. 3
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΣΕΛ. 3
3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΣΕΛ. 3
4. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ	ΣΕΛ. 3
5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΣΕΛ. 4
5.1 Γενικές προειδοποιήσεις.....	σελ. 4
5.2 Προειδοποιήσεις για τη χρήση	σελ. 4
5.3 Προειδοποιήσεις για τη σταθερότητα.....	σελ. 4
5.4 Προειδοποιήσεις για τη συναρμολόγηση	σελ. 4
6. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ.....	ΣΕΛ. 5
7. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ	ΣΕΛ. 5
8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΣΕΛ. 5
8.1 Πριν από τη συναρμολόγηση	σελ. 5
8.2 Συναρμολόγηση μοντέλου RP540	σελ. 5
8.2.1 Κλείσιμο του τροχήλατου περιπατητήρα	σελ. 6
8.2.2 Τοποθέτηση χειρολαβών και ρύθμιση λαβών	σελ. 6
8.2.3 Τοποθέτηση τσάντας αποθήκευσης.....	σελ. 6
8.2.4 Κάθισμα	σελ. 6
8.2.5 Υποπόδια	σελ. 6
8.3 Συναρμολόγηση μοντέλου RP545	σελ. 6
8.3.1 Κλείσιμο του τροχήλατου περιπατητήρα	σελ. 7
8.3.2 Τοποθέτηση χειρολαβών και ρύθμιση λαβών	σελ. 7
8.3.3 Τοποθέτηση τσάντας αποθήκευσης.....	σελ. 7
8.3.4 Κάθισμα	σελ. 7
8.4 Συναρμολόγηση μοντέλου RP551	σελ. 7
8.4.1 Κλείσιμο του τροχήλατου περιπατητήρα	σελ. 8
8.4.2 Τοποθέτηση χειρολαβών και ρύθμιση λαβών	σελ. 8
8.4.3 Τοποθέτηση του στηρίγματος πλάτης	σελ. 8
8.4.4 Τοποθέτηση τσάντας αποθήκευσης.....	σελ. 8
8.4.5 Κάθισμα	σελ. 8
9. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΕΛ. 9
10. ΦΡΕΝΑ.....	ΣΕΛ. 9
10.1 Χρήση του φρένου	σελ. 9
10.2 Ασφάλιση φρένου (φρένο στάθμευσης).....	σελ. 9
11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΣΕΛ. 9
12. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.....	ΣΕΛ. 9
13. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΟΧΩΝ	ΣΕΛ. 9
14. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.....	ΣΕΛ. 10
15. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ.....	ΣΕΛ. 10
16. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ/ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΣΕΛ. 10
17. ΕΓΓΥΗΣΗ	ΣΕΛ. 10
17.1 Επισκευές.....	σελ. 11
17.2 Ανταλλακτικά	σελ. 11
17.3 Ρήτρες απαλλαγής ευθύνης	σελ. 11

CE

Ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας I
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 5ης Απριλίου 2017, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

1. ΚΩΔΙΚΟΙ

RP540	Τροχήλατος περιπατητήρας αλουμινίου 4 τροχών, με κάθισμα και υποπόδια GAYA 2.0
RP545G	Αποσυναρμολογούμενος τροχήλατος περιπατητήρας αλουμινίου 4 τροχών με κάθισμα OCEANO 2.0, γκρι
RP545L	Τροχήλατος περιπατητήρας αλουμινίου 4 τροχών με κάθισμα OCEANO 2.0, λάιμ
RP545R	Τροχήλατος περιπατητήρας αλουμινίου 4 τροχών με κάθισμα OCEANO 2.0, ροζ
RP545B	Τροχήλατος περιπατητήρας αλουμινίου 4 τροχών με κάθισμα OCEANO 2.0, μπλε
RP545A	Αποσυναρμολογούμενος τροχήλατος περιπατητήρας αλουμινίου 4 τροχών με κάθισμα OCEANO 2.0, πορτοκαλί
RP545V	Αποσυναρμολογούμενος τροχήλατος περιπατητήρας αλουμινίου 4 τροχών με κάθισμα OCEANO 2.0, πράσινο
RP551	Τροχήλατος περιπατητήρας αλουμινίου 4 τροχών με στηρίγματα αντιβραχιών SATURNO

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν τροχήλατο περιπατητήρα της σειράς MOPEdia by Moretti S.p.a.

Οι τροχήλατοι περιπατητήρες MOPEdia by Moretti S.p.a. έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να καλύπτουν όλες τις ανάγκες σας, εξασφαλίζοντας πρακτική, ορθή και ασφαλή χρήση. Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σύντομες υποδείξεις για τη σωστή χρήση του προϊόντος που επιλέξατε, καθώς και σημαντικές συμβουλές για την ασφάλειά σας. Σας συνιστούμε να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο στο σύνολό του προτού χρησιμοποιήσετε τον τροχήλατο περιπατητήρα που αγοράσατε. Εάν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας, ο οποίος θα μπορέσει να σας βοηθήσει και να σας δώσει τις σωστές συμβουλές.

3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Ο παρών τροχήλατος περιπατητήρας προορίζεται για άτομα με κινητικές δυσκολίες και μπορεί να χρησιμοποιείται ως βοήθημα βάδισης. Ο τροχήλατος περιπατητήρας παρέχει αυξημένη σταθερότητα, στήριξη και ασφάλεια κατά τη βάδιση. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με εμφανώς μειωμένη λειτουργικότητα του χεριού ή/και του βραχίονα ούτε από άτομα με διαταραχές ισορροπίας. Ο τροχήλατος περιπατητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους. Συνιστούμε τη χρήση μόνο σε επιφάνειες στις οποίες όλοι οι τροχοί αγγίζουν το έδαφος. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε βραχώδες έδαφος ή σε κεκλιμένα επίπεδα, καθώς ο τροχήλατος περιπατητήρας μπορεί να καταστεί ασταθής. Το προϊόν δεν προορίζεται για τη μεταφορά ατόμων ή άλλων υλικών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



- Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η Moretti S.p.A. αποποιείται κάθε ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση του προϊόντος ή σε χρήση διαφορετική από εκείνη που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το προϊόν και το παρόν εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του.

4. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η MORETTI SpA δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα προϊόντα που κατασκευάζει και διαθέτει στην αγορά και ανήκουν στην οικογένεια ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΕΣ - MOPEdia συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, της 5ης Απριλίου 2017. Για τον σκοπό αυτό, η MORETTI SpA εγγυάται και δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη τα ακόλουθα:

1. Τα εν λόγω προϊόντα πληρούν τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745, σύμφωνα με το παράρτημα IV του ίδιου κανονισμού.
2. Τα εν λόγω προϊόντα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.
3. Τα εν λόγω προϊόντα ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ.
4. Τα εν λόγω προϊόντα διατίθενται στην αγορά σε ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ συσκευασία.
5. Τα εν λόγω προϊόντα θεωρούνται ότι υπάγονται στην κατηγορία I, σύμφωνα με το παράρτημα VIII του εν λόγω κανονισμού.

6. Η MORETTI SpA διατηρεί και θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, για τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία κατασκευής της τελευταίας παρτίδας, την τεχνική τεκμηρίωση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/745.

Σημείωση: Οι πλήρεις κωδικό του προϊόντος, ο ενιαίος αριθμός καταχώρισης του κατασκευαστή (SRN), το βασικό UDI-DI και τυχόν αναφορές στα πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν βρίσκονται στη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ που η MORETTI SPA εκδίδει και διαθέτει μέσω των καναλιών της.

5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

5.1 Γενικές προειδοποιήσεις

- ΜΗΝ εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν πριν διαβάσετε και κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Εάν δεν μπορείτε να κατανοήσετε τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τις οδηγίες, απευθυνθείτε σε επαγγελματία υγείας, αντιπρόσωπο ή τεχνικό προσωπικό πριν επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε το προϊόν, ώστε να αποφευχθούν ζημιές ή σωματικές βλάβες.
- Ο τροχήλατος περιπατητήρας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ασθενείς με κατάλληλη κινητική ικανότητα, η οποία διασφαλίζει την ασφαλή χρήση του.
- Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον θεραπευτή σας για να καθορίσετε την καταλληλότητα του προϊόντος, τη σωστή ρύθμιση και την ορθή χρήση του τροχήλατου περιπατητήρα.
- Ο γιατρός ή ο θεραπευτής σας θα πρέπει να συμβάλει στη ρύθμιση του ύψους του τροχήλατου περιπατητήρα, ώστε να εξασφαλιστούν η μέγιστη στήριξη, η σωστή ενεργοποίηση των φρένων και η ορθή συναρμολόγηση.
- Οι τροχήλατοι περιπατητήρες δεν προορίζονται για χρήση με αυτοπροώθηση.
- Ο χρήστης ή/και ο ασθενής οφείλει να αναφέρει κάθε σοβαρό περιστατικό που σχετίζεται με το προϊόν στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

5.2 Προειδοποιήσεις για τη χρήση

1. Βεβαιωθείτε πάντα ότι το καλώδιο των φρένων είναι σωστά στερεωμένο.
2. Ελέγχετε πάντοτε τη σωστή λειτουργία του φρένου μετά από κάθε ρύθμιση ύψους, ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική χαλάρωση και κάμψη του καλωδίου.
3. Η μη τήρηση αυτών των απλών προειδοποιήσεων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σωματικές βλάβες.
4. Ο τροχήλατος περιπατητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε τον τροχήλατο περιπατητήρα για να ανεβαίνετε σκάλες!
5. Πάντα να στηρίζετε και στις δύο χειρολαβές για να διατηρείτε την ισορροπία σας.
6. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε υγρές, παγωμένες ή χιονισμένες επιφάνειες.
7. Μην υπερφορτώνετε τον τροχήλατο περιπατητήρα.
8. Μην χρησιμοποιείτε το κάθισμα του τροχήλατου περιπατητήρα (όπου υπάρχει) για τη μεταφορά αντικειμένων ή ατόμων· το κάθισμα προορίζεται για χρήση από τον χρήστη μόνο με ενεργοποιημένο το φρένο στάθμευσης.
9. Όλοι οι τροχοί πρέπει να βρίσκονται πάντοτε σε επαφή με το δάπεδο κατά τη χρήση, ώστε να διασφαλίζονται η σωστή ισορροπία του τροχήλατου περιπατητήρα και η μέγιστη ασφάλεια.
10. Το φρένο στάθμευσης πρέπει να είναι ενεργοποιημένο πριν χρησιμοποιήσετε το κάθισμα.

Σημ.: Όταν ο τροχήλατος περιπατητήρας χρησιμοποιείται σε ακινητοποιημένη θέση, το φρένο στάθμευσης πρέπει να είναι ασφαλισμένο.

5.3 Προειδοποιήσεις για τη σταθερότητα

- Ο τροχήλατος περιπατητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομο βάρους έως 136 kg, συμπεριλαμβανομένου του φορτίου της τσάντας.
- Η τσάντα/το καλάθι έχει όριο βάρους 5 kg. Μην υπερφορτώνετε την τσάντα/το καλάθι, ώστε να αποφεύγονται η απώλεια ισορροπίας και ο κίνδυνος ανατροπής.

5.4 Προειδοποιήσεις για τη συναρμολόγηση

- Μετά τη συναρμολόγηση ή το άνοιγμα του τροχήλατου περιπατητήρα, βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα του καθίσματος έχει ασφαλίσει και στις δύο πλευρές και ότι η διάταξη ασφαλείας βρίσκεται στη σωστή θέση.
- Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο σωλήνες στήριξης των χειρολαβών έχουν εισαχθεί σωστά στο πλαίσιο και έχουν στερεωθεί στο κύριο στήριγμα με τα αντίστοιχα παξιμάδια τύπου πεταλούδας και τους κοχλίες σύσφιξης, χωρίς κανέναν τζόγο.

- Μην κρεμάτε αντικείμενα στο πλαίσιο του τροχήλατου περιπατητήρα, ώστε να αποφεύγονται η παραμόρφωση των σωλήνων και η υποβάθμιση της σταθερότητάς του.

Σημείωση: Προσέχετε να μην παγιδεύονται τα δάχτυλα ή/και τα ρούχα κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο.

6. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ



Κωδικός προϊόντος



Αποκλειστικό αναγνωριστικό τεχνολογικού προϊόντος



Σήμανση CE



Κατασκευαστής



Παρτίδα παραγωγής



Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης



Ιατροτεχνολογικό προϊόν



Όροι απόρριψης



Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος

EL

7. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, ελέγχετε πάντοτε τα ακόλουθα:

- Ελέγξτε ότι όλα τα μέρη του τροχήλατου περιπατητήρα είναι ασφαλισμένα σωστά.
- Ελέγξτε ότι όλες οι βίδες είναι σφιχτές.
- Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα έχει ασφαλίσει σωστά (διαφορετικά, πιέστε το με μεγαλύτερη δύναμη προς τα κάτω, προς το πλαίσιο).
- Ελέγξτε ότι η διάταξη ασφάλισης του καθίσματος έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του κύριου φρένου και του φρένου στάθμευσης.

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

8.1 Πριν από τη συναρμολόγηση

Αποσυσκευάστε το προϊόν και ελέγξτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Εάν ο τροχήλατος περιπατητήρας έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο.

8.2 Συναρμολόγηση μοντέλου RP540

- Ο τροχήλατος περιπατητήρας παραδίδεται με τα υποπόδια συσκευασμένα χωριστά.
- Κατά την πρώτη συναρμολόγηση του τροχήλατου περιπατητήρα, οι χειρολαβές με τους κοχλίες σύσφιξης δεν είναι συνδεδεμένες. Εισαγάγετε τους δύο σωλήνες στους κατακόρυφους ορθοστάτες.



- Πιέστε το κάθισμα του τροχήλατου περιπατητήρα έως ότου οι σωλήνες του πλαισίου ασφαλίσουν στη θέση κλειδώματος.
- Πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε πάντα ότι ο τροχήλατος περιπατητήρας δεν τείνει να διπλώνει υπό την επίδραση μιας μικρής πλευρικής δύναμης.
- Τοποθετήστε τα υποπόδια.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι οι κοχλίες σύσφιξης έχουν εισαχθεί σωστά στις οπές.

Πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε πάντα ότι ο τροχήλατος περιπατητήρας δεν τείνει να διπλώνει υπό την επίδραση μιας μικρής πλευρικής δύναμης. Προσέξτε να μην μπλεχτούν τα καλώδια των φρένων κατά τη σύνδεση των χειρολαβών και των τροχών.

8.2.1 Κλείσιμο του τροχήλατου περιπατητήρα

Τραβήξτε δυνατά προς τα επάνω τον ιμάντα του καθίσματος για να κλείσετε τον τροχήλατο περιπατητήρα.

8.2.2 Τοποθέτηση χειρολαβών και ρύθμιση λαβών

Τοποθετήστε τις χειρολαβές στο πλαίσιο. Πατήστε το ελατηριωτό κουμπί και ρυθμίστε το επιθυμητό ύψος. Επαναλάβετε τη διαδικασία στην αντίθετη πλευρά και βεβαιωθείτε ότι και οι δύο χειρολαβές έχουν ασφαλίσει σωστά και βρίσκονται στο ίδιο ύψος. Ο τροχήλατος περιπατητήρας διαθέτει χειρολαβές ρυθμιζόμενου ύψους ώστε να καλύπτει όλες τις ανάγκες του χρήστη.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ρυθμίστε το ύψος του τροχήλατου περιπατητήρα έτσι ώστε ο χρήστης που στέκεται με τα χέρια του στα πλάγια να έχει τον καρπό του στο ύψος των λαβών. Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι βραχίονες είναι λυγισμένοι περίπου στις 20°-30° όταν χρησιμοποιείτε τον τροχήλατο περιπατητήρα.

8.2.3 Τοποθέτηση τσάντας αποθήκευσης

Για να τοποθετήσετε την τσάντα αποθήκευσης, κρεμάστε τις θηλίες της στο στήριγμα του καθίσματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο της τσάντας: 5 kg. Μην υπερφορτώνετε την τσάντα/το καλάθι, ώστε να αποφεύγονται η απώλεια ισορροπίας και ο κίνδυνος ανατροπής.

8.2.4 Κάθισμα


Πριν καθίσετε, τοποθετήστε τον τροχήλατο περιπατητήρα σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια και, στη συνέχεια, ασφαλίστε τα φρένα. Περιστρέψτε το στήριγμα πλάτης, εάν απαιτείται. Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός ασφάλισης έχει στερεωθεί σωστά και ότι ο τροχήλατος περιπατητήρας βρίσκεται σε σταθερή θέση.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Καθίστε, κατανέμοντας το βάρος σας σε όλο το κάθισμα. Μην κάθεστε ασκώντας πίεση μόνο στη μία πλευρά.

8.2.5 Υποπόδια

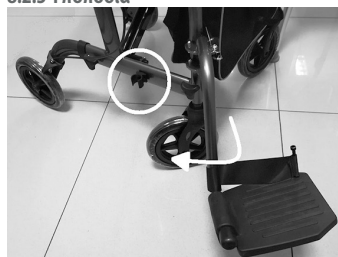

Τοποθετήστε τα υποπόδια στους αντίστοιχους πείρους. Όταν δεν χρησιμοποιούνται, αναδιπλώστε τα όπως φαίνεται στην εικόνα και ασφαλίστε τα με τα κλιπ.

8.3 Συναρμολόγηση μοντέλου RP545

- Περιστρέψτε τους τροχούς προς τη σωστή κατεύθυνση, λύστε τον ιμάντα που συγκρατεί τους πίσω τροχούς και στερεώστε τους πίσω και τους μπροστινούς τροχούς με τους παρεχόμενους κοχλίες σύσφιξης.
- Κατά την πρώτη συναρμολόγηση του τροχήλατου περιπατητήρα, οι χειρολαβές με τους κοχλίες σύσφιξης δεν είναι συνδεδεμένες. Εισαγάγετε τους δύο σωλήνες στους κατακόρυφους ορθοστάτες.



- Πιέστε το κάθισμα του τροχήλατου περιπατητήρα έως ότου οι σωλήνες του πλαισίου ασφαλισουν στη θέση κλειδώματος και, στη συνέχεια, ασφαλίστε το κλιπ ασφαλείας.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Βεβαιωθείτε ότι οι κοιλίες σύσφιξης έχουν εισαχθεί σωστά στις οπές. Πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε πάντα ότι ο τροχήλατος περιπατητήρας δεν τείνει να διπλώνει υπό την επίδραση μιας μικρής πλευρικής δύναμης. Προσέξτε να μην μπλεχτούν τα καλώδια των φρένων κατά τη σύνδεση των χειρολαβών και των τροχών.

EL

8.3.1 Κλείσιμο του τροχήλατου περιπατητήρα

Τραβήξτε δυνατά προς τα επάνω τον ιμάντα του καθίσματος για να κλείσετε τον τροχήλατο περιπατητήρα.

8.3.2 Τοποθέτηση χειρολαβών και ρύθμιση λαβών

Τοποθετήστε τις χειρολαβές στο πλαίσιο. Πατήστε το ελατηριωτό κουμπί και ρυθμίστε το επιθυμητό ύψος. Επαναλάβετε τη διαδικασία στην αντίθετη πλευρά και βεβαιωθείτε ότι και οι δύο χειρολαβές έχουν ασφαλίσει σωστά και βρίσκονται στο ίδιο ύψος. Ο τροχήλατος περιπατητήρας διαθέτει χειρολαβές ρυθμιζόμενου ύψους ώστε να καλύπτει όλες τις ανάγκες του χρήστη.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ρυθμίστε το ύψος του τροχήλατου περιπατητήρα έτσι ώστε ο χρήστης που στέκεται με τα χέρια του στα πλάγια να έχει τον καρπό του στο ύψος των λαβών. Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι βραχίονες είναι λυγισμένοι περίπου στις 20°-30° όταν χρησιμοποιείτε τον τροχήλατο περιπατητήρα.

8.3.3 Τοποθέτηση τσάντας αποθήκευσης

Για να τοποθετήσετε την τσάντα αποθήκευσης, κρεμάστε τις θηλές της στο στήριγμα του καθίσματος και στερεώστε τους ιμάντες Velcro στο πλαίσιο.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο της τσάντας: 5 kg. Μην υπερφορτώνετε την τσάντα/το καλάθι, ώστε να αποφεύγονται η απώλεια ισορροπίας και ο κίνδυνος ανατροπής.

8.3.4 Κάθισμα

Πριν καθίσετε, τοποθετήστε τον τροχήλατο περιπατητήρα σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια και, στη συνέχεια, ασφαλίστε τα φρένα. Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός ασφάλισης έχει στερεωθεί σωστά και ότι ο τροχήλατος περιπατητήρας βρίσκεται σε σταθερή θέση.



ΠΡΟΣΟΧΗ!


Καθίστε, κατανέμοντας το βάρος σας σε όλο το κάθισμα. Μην κάθεστε ασκώντας πίεση μόνο στη μία πλευρά.

8.4 Συναρμολόγηση μοντέλου RP551

- Απελευθερώστε την ασφάλεια, εάν είναι ενεργοποιημένη
- Κατά την πρώτη συναρμολόγηση του τροχήλατου περιπατητήρα, οι χειρολαβές με τους κοιλίες σύσφιξης δεν είναι συνδεδεμένες. Εισαγάγετε τους δύο σωλήνες στους κατακόρυφους ορθοστάτες.



- Πιέστε το κάθισμα του τροχήλατου περιπατητήρα έως ότου οι σωλήνες του πλαισίου ασφαλιστούν στη θέση κλειδώματος και, στη συνέχεια, ασφαλίστε το κλιπ ασφαλείας.

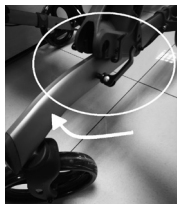

- Περιστρέψτε τους ορθοστάτες των τροχών και ασφαλίστε τους με τον πείρο όπως φαίνεται στο σχήμα.

EL



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε πάντα ότι ο τροχήλατος περιπατητήρας δεν τείνει να διπλώνει υπό την επίδραση μιας μικρής πλευρικής δύναμης. Προσέξτε να μην μπλεχτούν τα καλώδια των φρένων κατά τη σύνδεση των χειρολαβών και των τροχών.

8.4.1 Κλείσιμο του τροχήλατου περιπατητήρα

Τραβήξτε δυνατά το κάθισμα προς τα επάνω για να κλείσετε τον τροχήλατο περιπατητήρα.

8.4.2 Τοποθέτηση χειρολαβών και ρύθμιση λαβών

Τοποθετήστε τις χειρολαβές στο πλαίσιο και ασφαλίστε τες σωστά. Ο τροχήλατος περιπατητήρας διαθέτει χειρολαβές ρυθμιζόμενου ύψους με κοιλίες σύσφιξης, ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες του χρήστη.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ρυθμίστε το ύψος του τροχήλατου περιπατητήρα έτσι ώστε ο χρήστης που στέκεται με τα χέρια του στα πλάγια να έχει τον καρπό του στο ύψος των λαβών. Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι βραχιόνες είναι λυγισμένοι περίπου στις 20°-30° όταν χρησιμοποιείτε τον τροχήλατο περιπατητήρα.

8.4.3 Τοποθέτηση του στηρίγματος πλάτης

Τοποθετήστε το στηρίγμα πλάτης στους ειδικούς πλαστικούς οδηγούς του πλαισίου του τροχήλατου περιπατητήρα.

8.4.4 Τοποθέτηση τσάντας αποθήκευσης

Για να τοποθετήσετε την τσάντα αποθήκευσης, κρεμάστε τις θηλιές της στο στηρίγμα του καθίσματος και στερεώστε τους μάντες Velcro στο πλαίσιο.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο της τσάντας: 5 kg. Μην υπερφορτώνετε την τσάντα/το καλάθι, ώστε να αποφεύγονται η απώλεια ισορροπίας και ο κίνδυνος ανατροπής.

8.4.5 Κάθισμα

Πριν καθίσετε, τοποθετήστε τον τροχήλατο περιπατητήρα σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια και, στη συνέχεια, ασφαλίστε τα φρένα.

Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός ασφάλισης έχει στερεωθεί σωστά και ότι ο τροχήλατος περιπατητήρας βρίσκεται σε σταθερή θέση.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Καθίστε, κατανέμοντας το βάρος σας σε όλο το κάθισμα. Μην κάθεστε ασκώντας πίεση μόνο στη μία πλευρά.

9. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Ξεκινήστε να σπρώχνετε όταν στέκεστε όρθιοι με τα δύο χέρια στις λαβές.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χρησιμοποιήσετε τον τροχήλατο περιπατητήρα, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ολίσθησης.
- Περιπατήστε όρθιοι με το βλέμμα σας στραμμένο προς τα εμπρός, όχι προς τα κάτω.
- Μην ωθείτε τον τροχήλατο περιπατητήρα πολύ μακριά από το σώμα σας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πτώση και ακατάλληλη καταπόνηση.
- Μην χρησιμοποιείτε τον τροχήλατο περιπατητήρα για να ανεβείτε σε σκαλοπάτια μεγαλύτερα από 20 mm.
- Κατά τη χρήση σε εξωτερικό χώρο, να προτιμάτε πεζοδρόμια κατάλληλα διαμορφωμένα σύμφωνα με τις διατάξεις για την κατάργηση των αρχιτεκτονικών φραγμών.
- Για να υπερβείτε μικρά εμπόδια, πιέστε με το πόδι τους πίσω μοχλούς ανατροπής ώστε να ανασηκωθεί το εμπρός μέρος του τροχήλατου περιπατητήρα (μόνο για τα μοντέλα RP540 - RP545 - RP551).

10. ΦΡΕΝΑ

Η σωστή λειτουργία των φρένων εξαρτάται από τη φθορά και τους ρύπους που συσσωρεύονται στους τροχούς. Ελέγχετε την κατάσταση των φρένων και των τροχών πριν από κάθε χρήση.

10.1 Χρήση του φρένου

Για να φρενάρετε τον τροχήλατο περιπατητήρα, τραβήξτε προς τα επάνω τους μοχλούς των φρένων με τα δάχτυλα, έως ότου ο περιπατητήρας επιβραδύνει ή σταματήσει. Για να συνεχίσετε τη μετακίνηση του τροχήλατου περιπατητήρα, αφήστε τους μοχλούς των φρένων.

10.2 Ασφάλιση φρένου (φρένο στάθμευσης)

Πιέστε προς τα κάτω τους μοχλούς των φρένων με την παλάμη· όταν ακουστεί το «κλικ», οι τροχοί έχουν ασφαλίσει. Ανασηκώστε τους μοχλούς των φρένων για να τους απελευθερώσετε από τη θέση ασφάλισης.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Όταν ο χρήστης παραμένει ακίνητος, τα φρένα πρέπει να είναι ασφαλισμένα.

11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Τα προϊόντα της σειράς **MOPEdia** by Moretti S.p.A. ελέγχονται διεξοδικά και φέρουν σήμανση CE κατά τη διάθεσή τους στην αγορά. Για την ασφάλεια του ασθενούς και του ιατρού, συνιστάται να ελέγχεται η καταλληλότητα χρήσης του τροχήλατου περιπατητήρα από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο εργαστήριο τουλάχιστον κάθε 2 έτη. Σε περίπτωση επισκευής πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα.

Η διάρκεια ζωής του προϊόντος εξαρτάται από τη χρήση, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τον καθαρισμό.

12. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα υγρό πανί με ουδέτερα απορρυπαντικά για τον καθαρισμό των εξαρτημάτων. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που περιέχουν διαλύτες, μεταλλικές βούρτσες ή λειαντικά ή αιχμηρά αντικείμενα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.

13. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΟΧΩΝ

1. Καθαρίστε τους τροχούς με χλιαρό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό. Στεγνώστε με καθαρό πανί.
2. Λιπαίνετε τους τροχούς σε τακτά χρονικά διαστήματα.

14. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σειρά GAYA 2.0										
Κωδικός προϊόντος	RP540									
Κάθισμα	45x31 cm									
Δομή	Αλουμίνιο									
Διαστάσεις και βάρη										
										
RP540	75	85 97	55	63	52	28	9,6	20	20	136 kg
Σειρά OCEANO 2.0 SATURNO										
Κωδικός προϊόντος	RP545					RP551				
Κάθισμα	45x20 cm					44x24 cm				
Δομή	Αλουμίνιο									
Διαστάσεις και βάρη										
										
RP545x	69	79 92	54	62	47	27	7,6	20	20	136 kg
RP551	70	115÷130 Προβραχύνιο 100÷115	61	68	52	28	7,9	25		

*Οι διαστάσεις εκφράζονται σε cm και ενδέχεται να διαφέρουν κατά $\pm 0,5$ cm

15. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Κατά την απόρριψη του προϊόντος, μην χρησιμοποιείτε τα συνήθη συστήματα συλλογής αστικών στερεών αποβλήτων. Συνιστάται η απόρριψη του προϊόντος μέσω των δημοτικών σημείων συλλογής, ώστε να πραγματοποιείται η προβλεπόμενη ανακύκλωση των χρησιμοποιούμενων υλικών.

16. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ/ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Για ανταλλακτικά και εξαρτήματα ανατρέξτε στον γενικό κατάλογο της Moretti S.p.A.

17. ΕΓΓΥΗΣΗ

Όλα τα προϊόντα Moretti καλύπτονται από εγγύηση για ελαττώματα υλικού ή κατασκευής για περίοδο 2 (δύο) ετών από την ημερομηνία πώλησης, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων και περιορισμών που αναφέρονται παρακάτω. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ακατάλληλης ή καταχρηστικής χρήσης, τροποποίησης του προϊόντος ή μη τήρησης των οδηγιών χρήσης. Η ορθή προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Η Moretti δεν ευθύνεται για ζημιές, σωματικές βλάβες ή οποιαδήποτε άλλη συνέπεια που προκαλείται από ή σχετίζεται με εγκατάσταση ή/και χρήση του εξοπλισμού κατά τρόπο που δεν συμμορφώνεται αυστηρά με τις οδηγίες των εγχειριδίων εγκατάστασης, συναρμολόγησης και χρήσης.

Η Moretti δεν καλύπτει ζημιές ή ελαττώματα των προϊόντων Moretti στις ακόλουθες περιπτώσεις: φυσικές καταστροφές, μη εξουσιοδοτημένες εργασίες συντήρησης ή επισκευής, ζημιές που οφείλονται σε προβλήματα ηλεκτρικής τροφοδοσίας (όπου προβλέπεται), χρήση εξαρτημάτων ή μερών που δεν παρέχονται από τη Moretti, μη τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών και των οδηγιών χρήσης, μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις, ζημιές κατά τη μεταφορά (εκτός της αρχικής αποστολής από τη Moretti) ή μη εκτέλεση της συντήρησης όπως ορίζεται στο εγχειρίδιο. Τα αναλώσιμα εξαρτήματα δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση, εφόσον η ζημιά οφείλεται στη φυσιολογική χρήση του προϊόντος.

17.1 Επισκευές

Επισκευή βάσει εγγύησης: Εάν ένα προϊόν Moretti παρουσιάσει ελάττωμα υλικού ή κατασκευής κατά την περίοδο εγγύησης, η Moretti θα αξιολογήσει μαζί με τον πελάτη εάν το ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύηση. Η Moretti μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει το προϊόν που καλύπτεται από την εγγύηση, σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Moretti ή στις εγκαταστάσεις της. Το κόστος εργασίας που σχετίζεται με την επισκευή του προϊόντος μπορεί να επιβαρύνει τη Moretti, εάν διαπιστωθεί ότι η επισκευή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εγγύησης. Η επισκευή ή αντικατάσταση δεν ανανεώνει ούτε παρατείνει την εγγύηση.

Επισκευή προϊόντος που δεν καλύπτεται από την εγγύηση: Προϊόν που δεν καλύπτεται από την εγγύηση μπορεί να επιστραφεί για επισκευή μόνο κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από την Εξυπηρέτηση Πελατών της Moretti. Το κόστος εργασίας και αποστολής για επισκευή που δεν καλύπτεται από την εγγύηση επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον πελάτη ή τον αντιπρόσωπο. Οι επισκευές προϊόντων που δεν καλύπτονται από την εγγύηση καλύπτονται για 6 (έξι) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του επισκευασμένου προϊόντος.

Μη ελαττωματικά προϊόντα: Ο πελάτης θα ενημερωθεί εάν, μετά τον έλεγχο και τη δοκιμή επιστραφέντος προϊόντος, η Moretti διαπιστώσει ότι το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό. Το προϊόν θα επιστραφεί στον πελάτη, ο οποίος θα επιβαρυνθεί με τα σχετικά έξοδα αποστολής.

17.2 Ανταλλακτικά

Τα γνήσια ανταλλακτικά MORETTI καλύπτονται από εγγύηση 6 (έξι) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής τους.

17.3 Ρήτρες απαλλαγής ευθύνης

Εκτός από όσα ορίζονται ρητά στην παρούσα εγγύηση και στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, η Moretti δεν παρέχει καμία άλλη δήλωση, εγγύηση ή προϋπόθεση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων, εγγυήσεων ή προϋποθέσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης και μη παρεμβολής. Η Moretti δεν εγγυάται ότι η χρήση του προϊόντος Moretti θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. Η διάρκεια τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων που ενδέχεται να επιβάλλονται από νομικές διατάξεις περιορίζεται στην περίοδο εγγύησης, εντός των ορίων των νομικών διατάξεων. Ορισμένα κράτη ή χώρες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στη διάρκεια μιας σιωπηρής εγγύησης ούτε τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό παρεπόμενων ή έμμεσων ζημιών σε σχέση με καταναλωτικά προϊόντα. Σε αυτά τα κράτη ή χώρες, ορισμένες εξαιρέσεις ή περιορισμοί της παρούσας εγγύησης ενδέχεται να μην ισχύουν για τον χρήστη. Η παρούσα εγγύηση ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Moretti S.p.A.

Via Bruxelles, 3
52022 Cavriglia (AR), Italy

info@morettispa.com
www.morettispa.com