

MORETTI S.p.A.
Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (AR) Italy

Tel. + 39 055 96 21 11
Fax. + 39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com

Part. IVA 00306090515
Meccanografico AR 005370
Reg. Imp. Arezzo 00306090515

R.E.A. Arezzo 68869
Cap. Soc. € 1.500.000,00
C/C Postale 13682521

Manuale di assemblaggio e di utilizzo accessori scooter

Codici:

CNA106 Cestino posteriore portaoggetti
CNA107 Cestino posteriore portaoggetti grande
CNA110 Portabombola
CNA116 Portabastone
CNA117 Portabastone doppio
CNA118 Porta stampelle
CNA122 Porta deambulatore
CNA145 Multiattacco 4 fori
CNA150 Copertura parasole per scooter

ATTENZIONE!


- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche, consultare il nostro sito per l'ultima versione disponibile del manuale d'uso

ATTENZIONE!

Il peso massimo consentito applicabile su qualsiasi supporto è di 10kg

Montaggio CNA106 CNA107

- 1 Rimuovere il tappo del supporto
- 2 Fissare saldamente il supporto alla struttura
- 3 Inserire la barra di blocco nel cestino
- 4 Inserire i pin e stringere la manopola
- 5 Inserimento del tubolare nel supporto, avvitare la manopola nel foro e stringere saldamente.

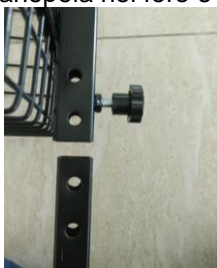

Immagini solo a scopo illustrativo

Montaggio CNA110 CNA116 CNA117 CNA118

- 1 Rimuovere il tappo del supporto
- 2 Avvitare saldamente il supporto alla struttura
- 3 Inserimento del tubolare nel supporto, avvitare la manopola nel foro e stringere saldamente

Montaggio CNA122


- 1 Rimuovere il tappo del supporto
- 2 Fissare saldamente il supporto alla struttura
- 3 Inserire i tubolari A nel supporto B e stringere le manopole
- 4 Inserire la struttura montata nel supporto C e stringere la manopola
- 5 Inserire sulla parte superiore il supporto E
- 6 Inserire sulla parte superiore il raccordo D e stringere la manopola
- 7 Inserire i ganci F su entrambi i lati del raccordo e stringere le manopole
- 8 Inserire del tubolare nel supporto e avvitare la manopola nel foro e stringere saldamente
- 9 Utilizzare sempre il laccio di velcro per assicurare il deambulatore alla struttura durante il trasporto



Immagini solo a scopo illustrativo

Montaggio CNA145

- 1 Rimuovere il tappo del supporto
- 2 Avvitare saldamente il supporto alla struttura
- 3 Inserire del tubolare nel supporto, avvitare la manopola nel foro e stringere saldamente
- 4 Inserimento degli accessori nei fori e stringere le manopole saldamente

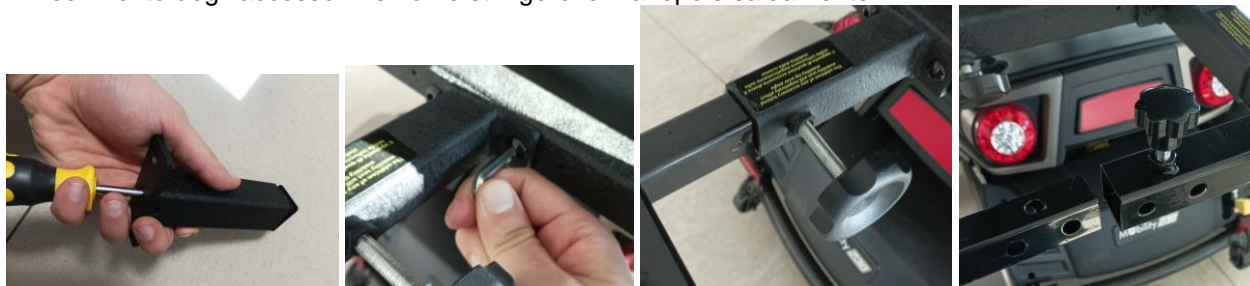

Immagini solo a scopo illustrativo

ATTENZIONE!

Gli accessori come i cestini e la copertura parasole vanno sempre messi nella posizione centrale

Montaggio CNA150



Immagini solo a scopo illustrativo

Misure:

CNA106

38x26 cm profondo 25 cm

CNA107

51x37 cm profondo 22 cm

CNA110

Diametro: 12 cm

Profondità: 24 cm

CNA116 CNA117 CNA118

Diametro tubolare: 5 cm

CNA150

Altezza dalla barra: 67 cm

Larghezza: 65 cm

Lunghezza: 80 cm

Scooter Accessories Assembly and Use Manual

Codes:

CNA106 Rear storage basket
CNA107 Rear storage basket, large
CNA110 Tank holder
CNA116 Stick holder
CNA117 Double cane holder
CNA118 Crutch holder
CNA122 Walker holder
CNA145 Multi-attachment 4 holes
CNA150 Sun cover for scooter

WARNING!

- It is forbidden to use the following device for purposes other than those defined in the following manual.
- Moretti S.p.A. declines all liability for damage resulting from improper use of the device or from use other than that indicated in this manual.
- The manufacturer reserves the right to make changes to the device and the following manual without prior notice in order to improve its features, please consult our website for the latest available version of the manual

WARNING!

The maximum weight allowed to be applied on any support is 10kg

Assembly CNA106 CNA107

- 1 Remove the cap from the bracket
- 2 Securely fasten the bracket to the structure
- 3 Insert the locking bar into the basket
- 4 Insert pins and tighten knob
- 5 Insert the tube into the holder, screw the knob into the hole and tighten firmly.



Images for illustration purposes only

Assembly CNA110 CNA116 CNA117 CNA118

- 1 Remove the cap from the bracket
- 2 Screw the support firmly onto the frame
- 3 Insert the tube into the bracket, screw the knob into the hole and tighten firmly

Montaggio CNA122

- 1 Remove the support cap
- 2 Securely fasten the bracket to the structure
- 3 Insert tubes A into support B and tighten the knobs
- 4 Insert the assembled frame into support C and tighten the knobs
- 5 Insert support E on top
- 6 Insert fitting D on top and tighten knob
- 7 Insert hooks F on both sides of the fitting and tighten the knobs
- 8 Insert tubing into the holder and screw the knob into the hole and tighten firmly
- 9 Always use the Velcro strap to secure the walker to the frame during transport



Images for illustration purposes only

Assembly CNA145

- 1 Remove the support cap
- 2 Screw the support firmly onto the frame
- 3 Insert tubing into the support, screw the knob into the hole and tighten firmly
- 4 Insert the accessories into the holes and tighten the knobs firmly



Images for illustration purposes only

ATTENTION!

Accessories such as baskets and sun cover must always be placed in the central position

Assembly CNA150



Images for illustration purposes only

Measures:

CNA106

38x26 cm depth 25 cm

CNA107

51x37 depth 22 cm

CNA110

Diameter: 12 cm

Depth: 24 cm

CNA116 CNA117 CNA118

Diameter: 5 cm

CNA150

Height from the structure: 67 cm

Width: 65 cm

Length: 80 cm

Accesorios Scooter Manual de montaje y uso

Codigos:

- CNA106 Cesta portaobjetos trasera
- CNA107 Cesta portaobjetos trasera, grande
- CNA110 Portabotellas
- CNA116 Porta bastones
- CNA117 Porta bastón doble
- CNA118 Soporte muletas
- CNA122 Soporte para andador
- CNA145 Fijación múltiple 4 agujeros
- CNA150 Cubresol para scooter

ADVERTENCIA!

- Está prohibido utilizar el siguiente aparato para fines distintos de los definidos en el en el siguiente manual.
- Moretti S.p.A. declina toda responsabilidad por daños derivados de un uso inadecuado del aparato o de un uso distinto del indicado en este manual.
- El fabricante se reserva el derecho de aportar, sin previo aviso, modificaciones al aparato y al manual sin previo aviso con el fin de mejorar sus características, consulte nuestro sitio web para obtener la última versión disponible del manual de usuario.

ADVERTENCIA!

El peso máximo admisible que puede colocarse sobre cualquier soporte es de 10 kg.

Montaje CNA106 CNA107

- 1 Retire la tapa del soporte
- 2 Fije el soporte al bastidor
- 3 Introduzca la barra de bloqueo en la cesta
- 4 Introduzca el pasador y apriete el pomo
- 5 Introduzca el tubo en el soporte, enrosque el pomo en el orificio y apriételo firmemente.



Imágenes con fines meramente ilustrativos

Montaje CNA110 CNA116 CNA117 CNA118

- 1 Retire la tapa del soporte
- 2 Atornille firmemente el soporte en el marco
- 3 Introduzca el tubo en el soporte, enrosque el pomo en el orificio y apriételo firmemente

Montaje CNA122

- 1 Retire la tapa del soporte
- 2 Fije el soporte a la estructura
- 3 Introduzca los tubos A en el soporte B y apriete los pomos
- 4 Introduzca la estructura montada en el soporte C y apriete los pomos
- 5 Inserte el soporte E en la parte superior
- 6 Inserte el herraje D en la parte superior y apriete el pomo
- 7 Inserte los ganchos F a ambos lados del herraje y apriete los pomos
- 8 Introduzca el tubo en el soporte y enrosque el pomo en el orificio y apriételo firmemente
- 9 Utilice siempre la correa de velcro para fijar el andador al armazón durante el transporte.



Imágenes con fines meramente ilustrativos

Montaje CNA145

- 1 Retire la tapa del soporte
- 2 Atornille firmemente el soporte al marco
- 3 Introduzca el tubo en el soporte, enrosque el pomo en el orificio y apriételo firmemente
- 4 Introduzca los accesorios en los orificios y apriete firmemente los pomos



Imágenes con fines meramente ilustrativos

ADVERTENCIA!

Los accesorios como cestas y parasoles deben colocarse siempre en posición central.

Montaje CNA150



Imágenes con fines meramente ilustrativos

Medidas:

CNA106

38x26 cm profundidad 25 cm

CNA107

51x37 profundidad 22 cm

CNA110

Diámetro: 12 cm

Profundidad: 24 cm

CNA116 CNA117 CNA118

Diámetro: 5 cm

CNA150

Altura desde la barra: 67 cm

Anchura: 65 cm

Longitud: 80 cm