

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 02 – 26.06.2026	

LTD715	Defibrillatore semi/automatico esterno
--------	--

Destinazione d'uso

Il defibrillatore è destinato al trattamento di pazienti adulti e pediatrici colpiti da arresto cardiaco improvviso, non responsivi. È progettato per l'utilizzo in luoghi e strutture pubbliche da parte di personale formato alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e di primo soccorso.

Caratteristiche principali

Il defibrillatore automatico esterno **LTD715** è un dispositivo progettato per l'intervento rapido in caso di arresto cardiaco improvviso. Il dispositivo analizza automaticamente il ritmo cardiaco del paziente tramite elettrodi adesivi e guida l'operatore con istruzioni vocali durante le fasi di soccorso e rianimazione cardiopolmonare. Fornisce indicazioni operative chiare e immediate.

Immagine prodotto

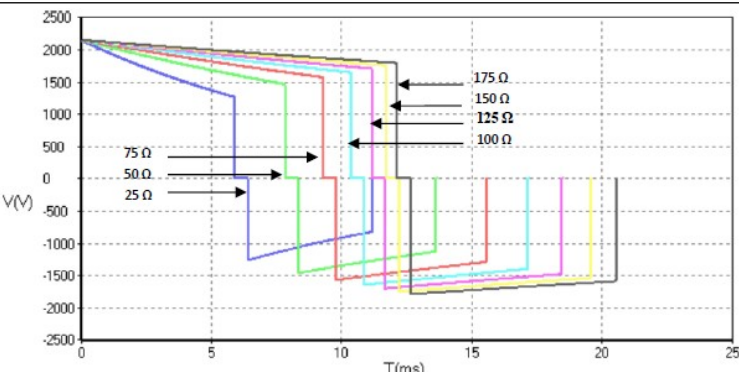


RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.
Paese di produzione	Cina
Dispositivo medico	UE 93/42
Classe di dispositivo	Classe III
Repertorio dei Dispositivi Medici	2974574

CARATTERISTICHE GENERALI

Classe di isolamento elettrico	II parte applicata CF
Grado di protezione liquidi/solidi	IP55
Modalità operativa	Funzionamento continuo

CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Condizioni operative	Temperatura ambiente: -20 °C~50 °C Umidità relativa 0%~95%, senza condensa Pressione atmosferica 570 hPa ~ 1062 hPa
Trasporto e stoccaggio a lungo termine	Temperatura 15 °C~35 °C Umidità relativa 0%~95%, senza condensa Pressione atmosferica 570 hPa~1062 hPa
Trasporto e stoccaggio a breve termine	Temperatura: -30 °C~70 °C Umidità relativa 0%~95%, senza condensa Pressione atmosferica 570 hPa~1062 hPa
CARATTERISTICHE ALIMENTAZIONE	
Batteria	Batteria 4200 mAh
Durata	8 anni stand-by 520 scariche da 150J 15 ore in continuo 210 scariche da 360J
CARATTERISTICHE DEFIBRILLAZIONE	
Norme applicabili	IEC 60601-2-4
Modalità di defibrillazione	Defibrillazione AED
Forma d'onda di defibrillazione	Forma d'onda BTE. I parametri della forma d'onda possono essere compensati automaticamente in base all'impedenza del paziente.
Intervallo di selezione dell'energia	Adulti: 100 J, 150 J, 170 J, 200 J, 300 J, 360 J Pediatrico: 10 J, 15 J, 20 J, 30 J, 50 J, 70 J, 100 J
Intervallo di impedenza	20~300 Ω
Ritmo cardiaco defibrillabile	VF, VT
Forma d'onda di defibrillazione	
CARATTERISTICHE FISICHE	
Dimensioni	30,6 cm × 21,8 cm × 9,6cm
Peso	2,0 ± 0,4 kg batteria inclusa