

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 06 – 11.07.2025	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

ST732	Materasso composito con scarichi differenziati
--------------	---

Destinazione d'uso

Dispositivo per uso domiciliare ed ospedaliero, per uso sul letto da degenza per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito di pazienti costretti a lungo degenze

Descrizione generale

Il materasso ST732/X è realizzato in schiuma poliuretanic micro cellulare a cellula aperta di tipo convenzionale, appositamente studiata per superare numerose normative internazionali dove viene prevista anche una elevata resistenza alla fiamma e un basso livello di opacità e tossicità dei fumi. Composto da una struttura portante con densità 40 Kg/m³. Superficie d'appoggio amovibile, in schiuma viscoelastica, lavorazione a tronco piramidale, a lento ritorno, a bassissima resa elastica in grado di adattarsi alla forma del corpo accogliendolo, evitando la pressione delle comuni schiume è suddivisa in tre parti:

1. Zona testa: superficie liscia, densità 30 Kg/m³
2. Zona tronco-bacino: lavorazione tronco piramidale, densità 60 Kg/m³
3. Zona piedi: lavorazione tronco piramidale, densità 50 Kg/m³


È stato prodotto all'origine senza l'impiego di C.F.C (clorofluorocarburi). Non contiene lattice (Latex Free)

Omologato e conforme alla norma UNI 9175 e UNI 9175/FA1 - CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 IM

Conforme alla norma di controllo densità ottica e analisi dei fumi: AIRBUS ATS 1000.001

Ha subito un trattamento per ostacolare la formazione di acari, batteri, muffe, microbi e assicurare una protezione chimica agli odori e un trattamento con grafite per la resistenza al fuoco.

Immagine prodotto

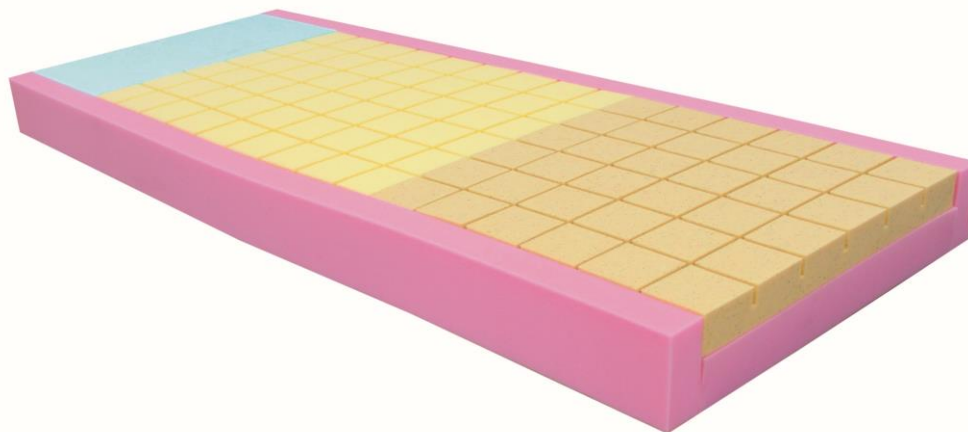

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35228
Codice di classificazione EMDN - CND	V080702
Codice nomenclatore DM 332/99	03.33.06.006
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	04.3306.006
Repertorio Dispositivi Medici	2253876

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Materasso	<i>Poliuretano</i>
Latex	<i>Assente</i>
Trattamenti	<i>Antimicrobico – Antibatterio – Antiacaro - Antimuffa</i>
Confezionamento	<i>PVC Sottovuoto</i>
Omologazioni	<i>Classe 1 Im</i>

DIMENSIONI

Lunghezza	<i>195 Cm</i>
Larghezza	<i>80 Cm</i>
Altezza	<i>14 Cm</i>
Peso	<i>8,5 Kg.</i>
Peso Massimo consigliato paziente	<i>150 Kg</i>

VARIANTI

ST732/1 – 1 Sezione H 14 Cm L 80 Cm – 8,5 Kg	
---	--