

LTD715 Defibrillatore semi/automatico esterno
Destinazione d'uso

Il defibrillatore è destinato al trattamento di pazienti adulti e pediatrici colpiti da arresto cardiaco improvviso, non responsivi. È progettato per l'utilizzo in luoghi e strutture pubbliche da parte di personale formato alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e di primo soccorso.

Caratteristiche principali

Il defibrillatore automatico esterno **LTD715** è un dispositivo progettato per l'intervento rapido in caso di arresto cardiaco improvviso. Il dispositivo analizza automaticamente il ritmo cardiaco del paziente tramite elettrodi adesivi e guida l'operatore con istruzioni vocali durante le fasi di soccorso e rianimazione cardiopolmonare. Fornisce indicazioni operative chiare e immediate.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.</i>
Paese di produzione	<i>Cina</i>
Dispositivo medico	<i>UE 93/42</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe III</i>
Repertorio dei Dispositivi Medici	<i>2974574</i>

CARATTERISTICHE GENERALI

Classe di isolamento elettrico	<i>Il parte applicata CF</i>
Grado di protezione liquidi/solidi	<i>IP55</i>
Modalità operativa	<i>Funzionamento continuo</i>

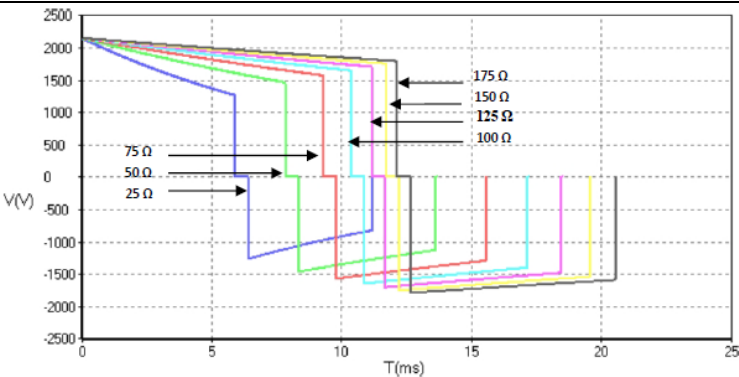
CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Condizioni operative	<i>Temperatura ambiente: -20 °C ~50 °C Umidità relativa 0%~95%, senza condensa Pressione atmosferica 570 hPa ~ 1062 hPa</i>
Trasporto e stoccaggio a lungo termine	<i>Temperatura 15 °C~35 °C Umidità relativa 0%~95%, senza condensa Pressione atmosferica 570 hPa~1062 hPa</i>
Trasporto e stoccaggio a breve termine	<i>Temperatura: -30 °C~70 °C Umidità relativa 0%~95%, senza condensa Pressione atmosferica 570 hPa~1062 hPa</i>

CARATTERISTICHE ALIMENTAZIONE

Batteria	<i>Batteria 4200 mAh</i>
Durata	<i>8 anni stand-by 520 scariche da 150J 15 ore in continuo 210 scariche da 360J</i>

CARATTERISTICHE DEFIBRILLAZIONE

Norme applicabili	<i>IEC 60601-2-4</i>
Modalità di defibrillazione	<i>Defibrillazione AED</i>
Forma d'onda di defibrillazione	<i>Forma d'onda BTE. I parametri della forma d'onda possono essere compensati automaticamente in base all'impedenza del paziente.</i>
Intervallo di selezione dell'energia	<i>Adulti: 100 J, 150 J, 170 J, 200 J, 300 J, 360 J Pediatrico: 10 J, 15 J, 20 J, 30 J, 50 J, 70 J, 100 J</i>
Intervallo di impedenza	<i>20~300 Ω</i>
Ritmo cardiaco defibrillabile	<i>VF, VT</i>
Forma d'onda di defibrillazione	

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni	<i>30,6 cm × 21,8 cm × 9,6cm</i>
Peso	<i>2,0 ± 0,4 kg batteria inclusa</i>