

LTM560

Sistema per terapia a compressione sequenziale


Destinazione d'uso

Dispositivo per presso terapia indicata per drenaggio linfatico.

Caratteristiche principali

Sistema di pressoterapia sequenziale, realizzato appositamente per il drenaggio linfatico ma anche per edemi, gambe e braccia gonfie e/o stanche, ritenzione idrica, cellulite, massaggi, etc. Le sezioni che compongono i bracciali, gambali e fascia addominale si gonfiano e si sgonfiano sequenzialmente grazie ai 2 programmi (A e B), eliminando e riducendo la possibilità di liquido stagnante. È possibile deselezionare le sezioni agendo direttamente sul display. La compressione inizia dalla sezione distale e si muove fino alla sezione prossimale, aiutando l'incremento di drenaggio del fluido. La pressione del sistema può essere regolata tramite il display touch screen.

Immagine prodotto

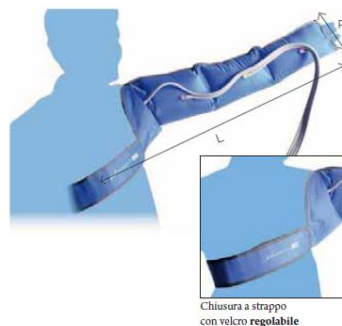

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	XIAMEN SENYANG CO. LTD
Paese di produzione	TAIWAN
Classe di dispositivo	Classe IIa
Codice di classificazione GMDN	44785
Codice di classificazione CND	Z12069080
Repertorio dei Dispositivi Medici	1449024
Norme tecniche di riferimento	EN 60601-1 ; EN 60601-1-2 ; EN 60601-1-11

MATERIALI PRINCIPALI GAMBALI BRACCIALI

Nylon	Poliuretano
-------	-------------

DATI TECNICI POMPA

Alimentazione	230V / 50 Hz – 30W
Pressione erogata	20 – 250 mmHg
Tempo di un ciclo	10-20-30 Minuti
Dimensioni compressore	26x17x13cm
Uscite	Singola a 4 canali

ACCESSORI

LTM563-S	Bracciale piccolo	4 Sezioni	70x25cm Circonferenza 50cm
LTM563-L	Bracciale grande	4 Sezioni	90x25cm Circonferenza 50cm
LTM566-S	Gambale corto	4 Sezioni	90x30cm Circonferenza 60cm
LTM566-L	Gambale large	4 Sezioni	110x30cm Circonferenza 60cm
LTM566-XXL	Gambale grande	4 Sezioni	90x40cm Circonferenza 80cm
LTM566-3XL	Gambale extra grande	4 Sezioni	110x36cm Circonferenza 72cm
LTM568	Estensione Gambale		110x10cm
LTM569-S	Fascia Addominale	4 Sezioni	120x40cm Circonferenza 63 cm
LTM569-L	Fascia Addominale grande	4 Sezioni	145x40cm Circonferenza 59,5 cm