



*Serie*  
**RUGY**  
MADE IN ITALY

# Poltrone multifunzione

---

Ideali per ambienti  
ambulatoriali ed ospedalieri

  
**SKEMA<sup>®</sup>FORM**



**Dispositivo Medico di Classe I**  
Conforme al nuovo regolamento MDR 2017/745 EU

## Poltrona multifunzione serie Ruggy

Progettata e realizzata interamente in Italia, è il prodotto perfetto per essere inserito negli ambienti ambulatoriali ed ospedalieri, ideale per tutte le tipologie di trattamenti medici.

Grazie alla sua ergonomia si può ottenere una postura fisiologica ottimale del paziente, con imbottiture speciali che si adattano perfettamente alla conformazione fisica, con il duplice vantaggio di facilitare i diversi trattamenti terapeutici, garantendo sempre la massima comodità al paziente, nelle posizioni richieste dalle esigenze operative. È possibile adottare la posizione di **Trendelenburg** fino ad una inclinazione di 15°.

Le imbottiture hanno una forma avvolgente per massimizzare il confort della persona e sono realizzate in schiuma poliuretanicca ad alta densità e rivestite in **ecopelle ignifugo** lavabile.

La poltrona è dotata di **4 motori elettrici** a bassa tensione, gestiti da un'unica pulsantiera di comando per regolare altezza, inclinazione schienale, inclinazione gambale e angolo di Trendelenburg. La strumentazione elettrica della poltrona è interamente di tipologia medica, conforme agli standard di sicurezza da normativa IEC60601-1.

La poltrona è completa di **portarotolo** e porta telecomando, entrambi posti sulla parte posteriore dello schienale.

La base è dotata di **4 ruote piroettanti**, ciascuna con freno indipendente, che rendono molto agevole lo spostamento della poltrona, ed è coperta da un carter in tecnopolimero per proteggere da polveri e liquidi e garantire una facile sanificazione.

Tutte le poltrone Ruggy hanno una **portata di 200 Kg** e sono certificate come **dispositivo medico** ai sensi del Regolamento Europeo MDR 2017/745 EU.

## Funzioni

Posizione di Trendelenburg



Movimento di elevazione



Inclinazione schienale e poggiambe



# Poltrona multifunzione *Rugy Visita - 3 sezioni*

**RUGY**  
MADE IN ITALY

**Poggiatesta**  
integrato  
imbottito

**Braccioli**  
imbottiti  
in ecopelle  
removibili

Disponibile

**IN PRONTA  
CONSEGNA**

cod. PM100BLU  
Colore **BLU #5946**  
con ruote

**4 motori**

**Rivestimento  
Classe 1 IM**  
di resistenza  
al fuoco

**In dotazione**



**Telecomando e  
portatelecomando**



**Portarotolo colore bianco**  
(immagine a scopo illustrativo)



**Poggiatesta**

## Caratteristiche tecniche

### SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura schiuma di poliuretano:

**Densità 40 Kg/m<sup>3</sup> - H: 5 cm**

Rivestimento:

**Ecopelle ignifugo lavabile**

Angolo di regolazione:

**Poggiagambe 0-107°**

**Schienale 0-85°**

**Trendelenburg 0-15°**

### DIMENSIONI E PESO

Ingombro distesa: **L 180 x P 88 cm**

H seduta: **52 a 92 cm**

Larghezza max seduta: **60 cm**

 **80 Kg**

 **200 kg**

**Colori Optional rivestimento  
senza supplemento\***



**#1944 #1816 #5947 #680**



**#41 #6 #991**

Vedi pagina optional

\* Disponibili in 10 gg lavorativi  
a partire dalla data dell'ordine

# Poltrona multifunzione *Rugy Ginecologica - 3 sezioni*



Disponibile

**IN PRONTA  
CONSEGNA**


cod.PM120BLU  
Colore **BLU #5946**  
con ruote

**RUGY**  
MADE IN ITALY

## In dotazione



**Telecomando e  
portatelecomando**

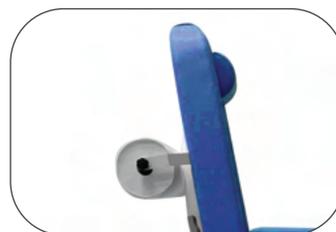

**Portarotolo colore bianco**  
(immagine a scopo illustrativo)



**Poggiatesta**



**Vaschetta raccogli liquidi**  
In acciaio inox estraibile ed  
asportabile

## Colori Optional rivestimento senza supplemento\*



#1944 #1816 #5947 #680 #41 #6 #991

Vedi pagina optional

\* Disponibili in 10 gg  
lavorativi a partire  
dalla data dell'ordine

## Caratteristiche tecniche

### SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura schiuma di poliuretano:

**Densità 40 Kg/m<sup>3</sup> - H: 5 cm**

Rivestimento:

**Ecopelle ignifugo lavabile**

Reggicosce: PU

Angolo di regolazione:

**Poggiagambe 0-107°**

**Schienale 0-85°**

**Trendelenburg 0-15°**

### DIMENSIONI E PESO

Ingombro distesa: **L 180 x P 88 cm**

H seduta: **52 a 92 cm**

Larghezza max seduta: **60 cm**

**95 Kg**

**200 kg**

# Poltrona multifunzione *Rugy Prelievo - 3 sezioni*

PRELIEVO  
INFUSIONE  
DIALISI

**RUGY**  
MADE IN ITALY



## In dotazione



Telecomando e portatelecomando



Portarotolo colore bianco  
(immagine a scopo illustrativo)



Poggiatesta

## Colori Optional rivestimento senza supplemento\*



Vedi pagina optional

\* Disponibili in 10 gg lavorativi a partire dalla data dell'ordine

## Caratteristiche tecniche

### SPECIFICHE TECNICHE

Imbottitura schiuma di poliuretano:

Densità 40 Kg/m<sup>3</sup> - H: 5 cm

Rivestimento:

Ecopelle ignifugo lavabile

Poggiabraccia: PU

Angolo di regolazione:

Poggiagambe 0-107°

Schienale 0-85°

Trendelenburg 0-15°

### DIMENSIONI E PESO

Ingombro distesa: L 180 x P 78 cm


H seduta: 52 a 92 cm

Larghezza max seduta: 60 cm

85 Kg

200 kg

## Accessori optional *con supplemento*

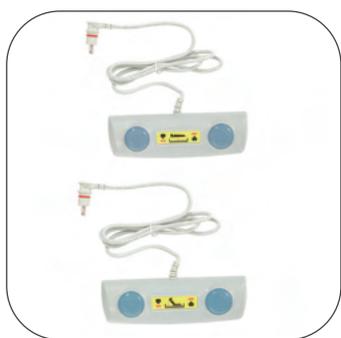

cod. PMA210

**Kit 2 Comandi a pedale**

Comando per alzatesta e comando per elevazione



cod. PMA200

**Asta flebo**

In alluminio anodizzato  
con 2 ganci in plastica  
(portata max. 2,5 Kg per gancio)

## Colori Optional rivestimento\* *senza supplemento*



TURCHESE #1944



VERDE LIME #1816



LILLA #5947



ROSSO #680



GIALLO #41



BIANCO #6



NERO #991

\* Disponibili in 10 gg lavorativi a partire dalla data dell'ordine



[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)

