

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 03 – 26.06.2026	

RI905	Sollevatore elettrico MUEVO HOME LIGHT – 135 Kg
--------------	--

Destinazione d'uso

Struttura mobile manovrata da operatore utilizzabile per il trasferimento di pazienti con difficoltà motorie.

Caratteristiche principali

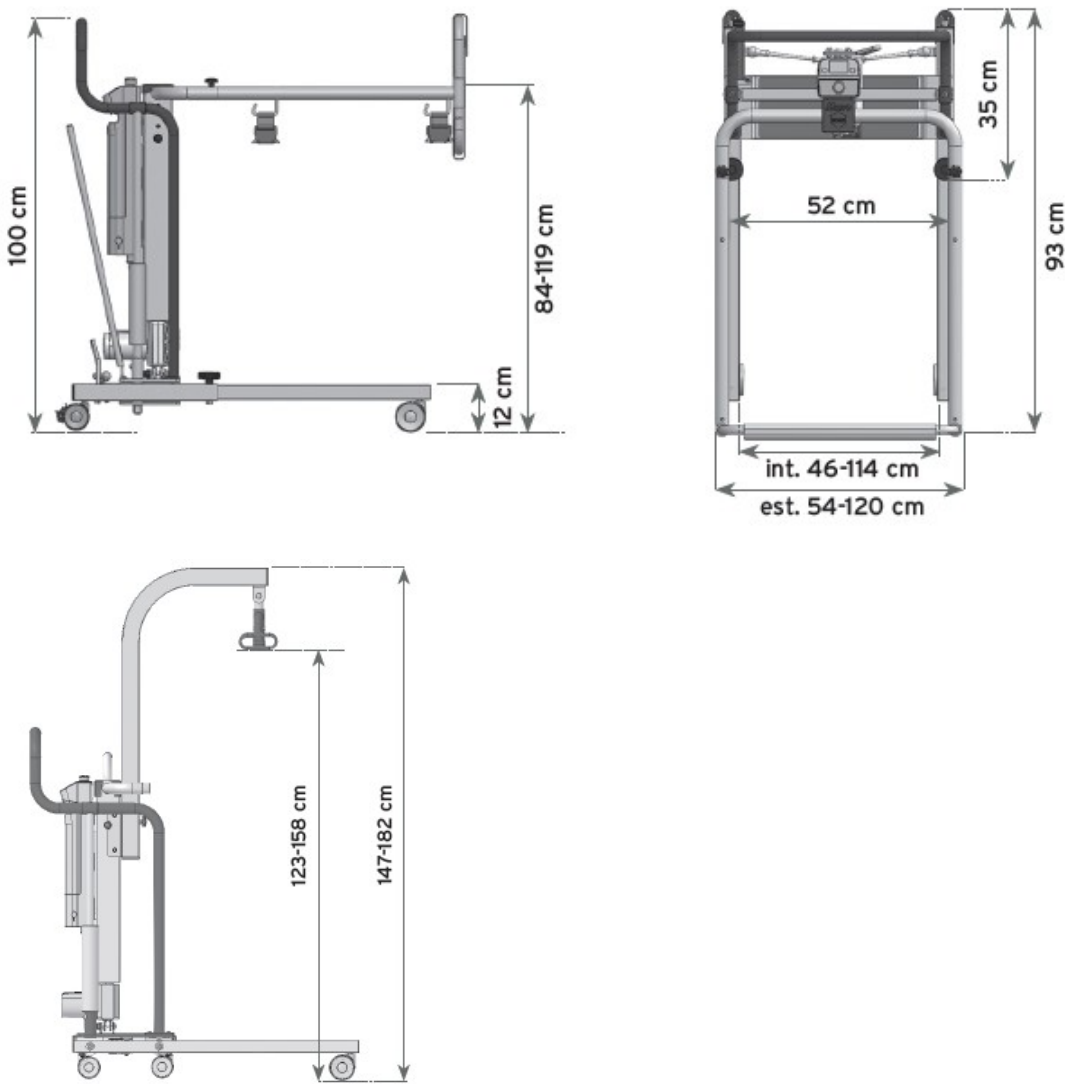
Struttura in acciaio verniciato. Cinque ruote piroettanti di cui due con freno. Motore a batteria TI MOTION. Elevazione tramite attuatore elettrico. La base apribile a compasso manualmente tramite leva in acciaio garantisce stabilità e facile accesso in ambienti con spazi ristretti. Portata massima 135 kg. Pulsante di arresto di emergenza. Avviso di termine batteria acustico e visivo sul telecomando. Batteria estraibile. Discesa di emergenza manuale. Sicurezza antischiacciamento. Schienale con imbottitura, rimovibile. Dotato di 4 ruote di cui 2 con freno.

Immagine prodotto



Riferimenti

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	12330
Codice Nomenclatore DM 332/99	12.36.03.006
Codice Nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.36.03.006
Codice Classificazione CND / EMDN	V0805030102
Numero RDM	2381054
Peso Max	135 Kg
Motorizzazione	TiMotion
Durata batteria stimata	Oltre 40 cicli a pieno carico

Materiali principali	
Struttura	Acciaio verniciato
Imbracatura	Poliestere
RIFERIMENTI DIMENSIONALI	
	
ACCESSORI	
RIA201	Imbracatura/seduta standard (In dotazione)
RIA211	Imbracatura/seduta per WC (Opzionale)
RIA220	Sostegno alla deambulazione (Opzionale)
RIA910	Braccio sollevamento centrale (Opzionale)