

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 14.10.2025	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

CP782	Carrozzina pieghevole leggera HELIOS GLIDE
-------	--

Destinazione d'uso

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio pieghevole in alluminio verniciato a polveri epossidiche antiruggine, crociera doppia, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori ad estrazione rapida in alluminio a raggi, con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, con gomme nere in PU senza camera d'aria e corrimano in alluminio verniciato nero. Ruote anteriori nere in PU spostabili in più posizioni con forcina in alluminio regolabile in inclinazione. Ruotini passaggio stretti / ascensore. Freno di stazionamento in alluminio. Fiancata protetti abiti con braccioli ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza con appoggio morbido in PU. Pedane ribaltabili ed estraibili regolabili in lunghezza con appoggio piedi separati in plastica nera e cinturino ferma-tallone regolabili in inclinazione.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE














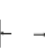








Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41622
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122106
Repertorio Dispositivi Medici	2829759
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.039

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	130 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Alluminio
Seduta	Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2
Ruote anteriori	PU
Ruote posteriori	PU Tubeless
Freni	Alluminio
Maniglie di spinta	PVC

VARIANTI	
CP782A-38: Seduta 38 Cm – Arancio	CP782A-40: Seduta 40 Cm – Arancio
CP782A-43: Seduta 43 Cm – Arancio	CP782A-46: Seduta 46 Cm – Arancio
CP782A-48: Seduta 48 Cm – Arancio	CP782A-50: Seduta 46 Cm – Arancio
CP782B-38: Seduta 38 Cm – Azzurra	CP782B-40: Seduta 40 Cm – Azzurra
CP782B-43: Seduta 43 Cm – Azzurra	CP782B-46: Seduta 46 Cm – Azzurra
CP782B-48: Seduta 48 Cm – Azzurra	CP782B-50: Seduta 46 Cm – Azzurra

DIMENSIONI																											
Misure in CM*																							Portata max				
CP782x-38																											
CP782x-40																											
CP782x-43																											
CP782x-46	104	79	41	88,5	97,5	75	82	48,5	53,5	40	50		44														
CP782x-48																											
CP782x-50																											

(*) Le misure possono variare di +/- 0,5 Cm

ACCESSORI OPZIONALI	
CPA501	TAVOLINO LINEARE
CPA506	TAVOLINO SAGOMATO
CPA517	TAVOLINO SAGOMATO Misura 50
CPR685	RUOTINI ANTIRIBALTAMENTO
CPA783(4)	PEDANE ELAVIBILI
CPA735	RUOTE POSTERIORI PNEUMATICHE
CPA140-xx	FROLUNGA DELLO SCHIENALE
CAR605	DISPOSITIVO ANTI-FURTO
CP995	MODULO POSTERALE PER TESTA
CPA100-xx	CUSCINO CARROZZINA - H5 CM
CPA605	PORTA BOMBOLE
RP245	CINTURA PER CARROZZINA TIPO AUTO
ST346	CUSCINO LOMBARE