

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 15.03.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

CP780	Carrozzina pieghevole leggera HELIOS ACT
-------	--

Destinazione d'uso

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio pieghevole in alluminio verniciato a polveri epossidiche antiruggine, crociera singola, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori ad estrazione rapida in alluminio a raggi, con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, con gomme nere in PU senza camera d'aria e corrimano in acciaio verniciato nero. Ruote anteriori nere in PU con forcella in alluminio spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione. Ruotini di transito. Freno di stazionamento in alluminio. Fiancata protegge abiti con braccioli ribaltabili ed estraibili con appoggio in PU. Pedane ribaltabili ed estraibili regolabili in lunghezza con appoggia piedi separati in plastica nera e cinturino ferma-tallone regolabili in inclinazione.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41622
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122106
Repertorio Dispositivi Medici	2389155
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.039
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.03.006









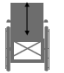
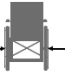
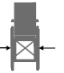





CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	120 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Alluminio
Seduta	Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2
Ruote anteriori	PU
Ruote posteriori	PU Tubeless
Freni	Alluminio
Maniglie di spinta	PVC

VARIANTI	
CP780-40: Seduta 40 Cm	CP780-43: Seduta 43 Cm
CP780-46: Seduta 46 Cm	CP780-48: Seduta 48 Cm
CP780-50: Seduta 50 Cm	

DIMENSIONI																	
Misure in CM*																	
CP780-40								40		61							
CP780-43								43		64							
CP780-46	104	80	41	90,5	73	51	40+50	46	44	66	30	15,6 kg	60	20 x3,2	optional	7	120 kg
CP780-48								48		69							
CP780-50								50		71							

(*) Le misure possono variare di +/- 0,5 Cm

ACCESSORI OPZIONALI	
CAR605	DISPOSITIVO ANTI-FURTO
CAR900	POGGIATESTA UNIVERSALE
CPA100-xx	CUSCINO CARROZZINA - H5 CM
CPA130	PEDANA UNICA
CPA251-x	KIT MONOGUIDA
CPA501	TAVOLINO LINEARE
CPA506	TAVOLINO SAGOMATO
CPA605	PORTA BOMBOLE
CPA776	BRACCIOLI ELEVABILI
CPA777	RUOTINE ANTIRIBALTAMENTO
RP245	CINTURA PER CARROZZINA TIPO AUTO
ST346	CUSCINO LOMBARE